

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

Для классификации материалов мягких контактных линз мы используем систему, предложенную в 2014 г. в «Contact Lenses & Solutions. Summary» (Приложение к журналу Contact Lens Spectrum) и сегодня широко применяемую в специальной литературе. Согласно этой классификации, силикон-гидрогелевые материалы выделены в отдельную 5-ю группу. Гидрогелевые материалы, как и прежде, распределены по 4 группам в зависимости от содержания воды и электрических свойств материала (ионные полимеры и неионные). Напомним, что содержание воды в гидрогелях практически полностью определяет Dk. Значение Dk для гидрогелей приблизительно можно оценить, исходя из содержания воды, руководствуясь таблицей:

H ₂ O	Dk
38% ±	9 ±
55% ±	18 ±
75% ±	36 ±

Таким образом, гидрогелевые линзы из 1-й и 3-й группы могут иметь Dk порядка 10, а из 2-й и 4-й - порядка 20-40. Силикон-гидрогелевые линзы, составляющие 5-ю группу, имеют значительно более высокие Dk.

В приведенной на этой странице таблице для каждой из 5 групп указаны наиболее распространенные материалы и типичные линзы (в качестве примеров линз включены основные линзы 4-х ведущих мировых производителей). Гидрогели 3-й группы в настоящее время практически не используются для изготовления мягких линз.

Отметим, что для характеристики мягких линз (особенно гидрогелевых) более важным параметром, чем Dk, является величина Dk/t (пропускание кислорода линзой, t - толщина линзы в центре или усредненное значение), поскольку последняя определяет реальное поступление кислорода к роговице глаза.

Следует отметить, что 5-я группа материалов становится все больше и больше - каждый год появляются новые силикон-гидрогели.

Алфавитные списки включенных в Справочник контактных линз приведены в начале. Впервые включенные в Справочник линзы выделены в этих списках, как

обычно, более жирным шрифтом. Алфавитный список фирм с их линзами размещен в конце Справочника.

Для силикон-гидрогелевых линз в таблицах в графе «Материал» указано «**силикон-гидрогель**» (слово выделено жирным текстом); все остальные линзы, не имеющие такого указания, относятся к гидрогелевым.

Таблицы

	Стр.
- Алфавитный список контактных линз	2
ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	
• Однодневные контактные линзы (сфер./асфер. дизайн)	8
- Линзы плановой замены (сфер./асфер. дизайн)	13
- Торические линзы	19
- Мультифокальные линзы	24
- Бифокальные линзы	24
- Цветные линзы	26
- Традиционные линзы	28
ЛИНЗЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ	29
- Список контактных линз по фирмам-производителям	31

<p>ГРУППА 1 Низкое содержание H₂O (<50%) Неионные гидрогели</p> <p>полимакон (38%) (Dk = 9) • Biomedics 38 • Optima FW</p> <p>хайоксифилкон Б (49%) (Dk = 15)</p> <p>хелфилкон А&Б (45%) (Dk = 12)</p>	<p>омафилкон Б (62%) (Dk = 27) • Proclear</p> <p>хайоксифилкон А (59%) (Dk = 28)</p> <p>хайоксифилкон Д (54%) (Dk = 21)</p> <p>хлафилкон Б (59%) (Dk = 22) • SofLens Daily Disposable • SofLens 59</p>	<p>окуфилкон Е (65%) (Dk = 22)</p> <p>фемфилкон А (55%) (Dk = 16) • Freshlook Colors/Colorblends/Dimensions</p> <p>этафилкон А (58%) (Dk = 28) • Acuvue • Acuvue 2 • 1-Day Acuvue • 1-Day Acuvue Moist • 1-Day Acuvue Define</p>	<p>лотрафилкон Б (33%) (Dk = 110) • Air Optix for Astigmatism • Air Optix Aqua Multifocal • Air Optix Aqua</p> <p>нарафилкон А (46%) (Dk = 100) • 1-Day Acuvue TruEye</p> <p>самфилкон А (46%) (Dk = 163) • Bausch+Lomb Ultra</p>
<p>ГРУППА 2 Высокое содержание H₂O (>50%) Неионные гидрогели</p> <p>альфафилкон А (66%) (Dk = 32) • Soflens Toric</p> <p>незофилкон А (78%) (Dk = 42) • Biotrue ONE Day</p> <p>недфилкон А (69%) (Dk = 26) • Dailies Aqua Comfort Plus • Focus Dailies Toric • FreshLook One-Day</p> <p>омафилкон А (60%) (Dk = 25) • Proclear 1 day</p>	<p>ГРУППА 3 Низкое содержание H₂O (<50%) Ионные гидрогели</p> <p>окуфилкон А (44%)</p>	<p>ГРУППА 4 Высокое содержание H₂O (>50%) Ионные гидрогели</p> <p>окуфилкон Б (53%) (Dk = 16)</p> <p>окуфилкон С (55%) (Dk = 16)</p> <p>окуфилкон Д (55%) (Dk = 19) • Biomedics 55 Evolution asphere • Biomedics toric</p>	<p>ГРУППА 5 Силикон-гидрогели</p> <p>балафилкон А (36%) (Dk = 112) • PureVision • PureVision 2</p> <p>галифилкон А (47%) (Dk = 60) • Acuvue Advance with Hydraclear</p> <p>делефилкон А (33% внутри, ≥80% на поверхности) (Dk = 140) • Dailies Total 1</p> <p>комфилкон А (48%) (Dk = 128) • Biofinity • Biofinity toric • Biofinity multifoc. • Biofinity XR • Biofinity XR toric</p> <p>лотрафилкон А (24%) (Dk = 140) • Air Optix Night & Day Aqua</p>
			<p>сенофилкон А (38%) (Dk = 103) • Acuvue Oasys with Hydraclear Plus • Acuvue Oasys for Astigmatism • Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe</p> <p>сомофилкон А (56%) (Dk=60) • clariti 1 day • Clariti elite • clariti 1 day toric • clariti 1 day multifocal</p> <p>стенфилкон А (54%) (Dk = 80) • MyDay daily disposable</p> <p>фанфилкон А (55%) (Dk=90) • Avaira Vitality • Avaira Vitality toric</p> <p>энфилкон А (46%) (Dk = 100) • Avaira</p>

Контактные линзы. Справочные таблицы. 2020 г. / Приложение к журналу «Вестник Оптометрии»/

По вопросам приобретения электронной версии обращаться в Редакцию: optometry@mail.ru

© «Вестник оптометрии», 2020

Адрес редакции

107076, Москва,
ул.Электрозаводская, д. 29, стр. 1, оф. 110
Телефон/факс: (495) 644-73-90, 964-19-28
www.optica4all.ru e-mail: optometry@mail.ru

НОВИНКА!



- **ДЕЗИНФЕКЦИЯ** сопоставима по качеству с пероксидной системой²⁻⁴
- **99,9%** уничтожения обеих форм *Acanthamoeba*²⁻⁴
- **>90%** удаления белковых отложений⁶

ACUVUE Oasys® + COMPLETE RevitaLens®* =

- Отличное сочетание для комфорта и чёткого зрения^{1,5}
- Доказательная совместимость с точки зрения физиологии глаза^{1,5}

* ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS + COMPLETE RevitaLens® Multi-Purpose Disinfecting Solution. 1. Данные в файлах компании JVC (5230) 2016 г. Клиническая и лабораторная оценка 3 материалов контактных линз с 4 растворами для контактных линз. 2. Николки М. и др. Сравнительная эффективность новых растворов для ухода за контактными линзами в отношении бактерий, грибов и *Acanthamoeba*. Британская ассоциация контактологов, 2011 г. 3. Колар С.С.Н. и др. Эффективность растворов по уходу за контактными линзами в отношении уничтожения *Acanthamoeba castellanii*, определённая путём тестирования *in vitro* и визуализации в реальном времени. Contact Lens & Anterior Eye. 2015. 4. Килвингтон С. и др. Разработка нового многофункционального раствора для контактных линз: сравнительный анализ микробиологических, биологических и клинических характеристик. J. Optom. 2010; 3(3): 134-142. 5. JJV data on file 2017. RevitaLens OcuTec® MPDS compatibility and clinical performance with ACUVUE® Brand CLs (2 week DW study with senofilcon A, etafilcon A & galyfilcon A, n=203 habitual soft CL wearers; 1-month DW study with senofilcon C toric CLs, n=130 habitual soft toric CL wearers; in-vitro laboratory evaluations with ACUVUE® Brand reusable CL materials). © 2019, ООО «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Пер. уд. № ФСЗ 2010/07713 от 06.04.2018 г., № ФСЗ 2008/01309 от 28.02.2017 г., №ФСЗ 2011/10818 от 22.04.2019 г.

СИЛИКОН-ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ
1-Day Acuvue TruEye	JOHNSON & JOHNSON	ОДНОДНЕВНЫЕ
Acuvue Oasys 1-Day	JOHNSON & JOHNSON	ОДНОДНЕВНЫЕ
Acuvue Oasys 1-Day for Astigmatism	JOHNSON & JOHNSON	ТОРИЧ./ ОДНОДНЕВ.
Acuvue Oasys for Astigmatism	JOHNSON & JOHNSON	ТОРИЧЕСКИЕ
Acuvue Oasys with Hydraclear Plus	JOHNSON & JOHNSON	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Adria O ₂	INTEROJO	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE	ALCON	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
AIR OPTIX AQUA	ALCON	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
AIR OPTIX AQUA Multifocal	ALCON	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ
AIR OPTIX for Astigmatism	ALCON	ТОРИЧЕСКИЕ
AIR OPTIX Colors	ALCON	ЦВЕТНЫЕ
AIR Optix Night&Day AQUA	ALCON	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Avaira	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Avaira Vitality	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Avaira Vitality toric	COOPERVISION	ТОРИЧЕСКИЕ
Bausch+Lomb Ultra	BAUSCH + LOMB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Biofinity	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Biofinity multifocal	COOPERVISION	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ
Biofinity toric	COOPERVISION	ТОРИЧЕСКИЕ
Biofinity XR	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Biofinity XR toric	COOPERVISION	ТОРИЧЕСКИЕ
clariti 1 day	COOPERVISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
clariti 1 day multifocal	COOPERVISION	МУЛЬТИФ./ОДНОДНЕВ.
clariti 1 day toric	COOPERVISION	ТОРИЧЕСК./ОДНОДНЕВ.
clariti elite	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Clearday BEYOND	CLEARLAB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ
Clearday BEYOND toric	CLEARLAB	ТОРИЧЕСКИЕ
Clearday BEYOND 1-day	CLEARLAB	ОДНОДНЕВНЫЕ
Clearday BEYOND 1-day toric	CLEARLAB	ТОРИЧ./ ОДНОДНЕВ.
Clearday BEYOND 1-day multifocal	CLEARLAB	МУЛЬТИФОК./ ОДНОД.
Dailies Total 1	ALCON	ОДНОДНЕВНЫЕ
Dailies Total 1 Multifocal	ALCON	МУЛЬТИФОК./ ОДНОД.
IQ Lens Oxygen Monthly	UNICON OPTICAL	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Maxima 1-Day Premium	COOPERVISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
Maxima Si Hy	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Maxima Si Hy Plus	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Miru 1 month Menicon	MENICON	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Miru 1 month Menicon for Astigmatism	MENICON	ТОРИЧЕСКИЕ
Miru 1 month Menicon Multifocal	MENICON	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ
MyDay daily disposable	COOPERVISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
OKVision Fusion New	INTEROJO	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
OKVision Premium SH-48	OKVISIONE [KONTAKT LENS]	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
PureVision	BAUSCH + LOMB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
PureVision 2 HD	BAUSCH + LOMB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
PureVision 2 HD for Astigmatism	BAUSCH + LOMB	ТОРИЧЕСКИЕ
PureVision Multi-Focal	BAUSCH + LOMB	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ
VizoTeque Supreme	MPG&E	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
VizoTeque Vero One	MPG&E	ОДНОДНЕВНЫЕ
Zeiss Contact Day 30 air	WOEHLK	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Zeiss Contact Day 30 air toric	WOEHLK	ТОРИЧЕСКИЕ
Офталмикс ONE DAY	COOPERVISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
Офталмикс Profi	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ /НЕОКРАШЕННЫЕ/

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ
1-Day Acuvue Moist	JOHNSON & JOHNSON	ОДНОДНЕВНЫЕ
1-Day Acuvue Moist for Astigmatism	JOHNSON & JOHNSON	ТОРИЧЕСК./ОДНОДНЕВ.
1-Day Acuvue Moist Multifocal	JOHNSON & JOHNSON	МУЛЬТИФОК./ОДНОДН.
Adria Go	INTEROJO	ОДНОДНЕВНЫЕ
Adria Season	INTEROJO	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Adria Sport	INTEROJO	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Aquamax	PEGAVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ
Aquamax 1-Day	PEGAVISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
Aquamax 1 Day Vita	PEGAVISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
Aquamax 38	PEGAVISION	ТРАДИЦ./ПЛАН.ЗАМ.
Biomedics 55 Evolution aspher	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Biotrue ONE Day	BAUSCH + LOMB	ОДНОДНЕВНЫЕ
Clear 1-day	CLEARLAB	ОДНОДНЕВНЫЕ
Clear 1-day toric	CLEARLAB	ТОРИЧЕСК./ОДНОДНЕВ.
Clear 55 A	CLEARLAB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ

Продолжение таблицы на стр. 4

Avaira Vitality – носить легко

Линза нового поколения*
в 2-недельном сегменте



Высокое влагосодержание без дополнительных увлажнителей и обработки поверхности¹




Гибкость и мягкость материала линзы



100% потребление кислорода²



УФ-фильтр³

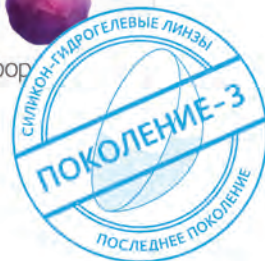

CooperVision®
Живи ярко

*Под новым поколением понимается 3-е поколение материалов контактных линз согласно делению: 1-е поколение – Обработанная поверхность, высокий Dk, высокий модуль упругости, низкое содержание воды. 2-е поколение – Обработанная поверхность или увлажняющий агент, от среднего до высокого Dk, низкий модуль упругости, низкое содержание воды. 3-е поколение – Нет обработки поверхности, высокий Dk, низкий модуль упругости, оптимальное содержание воды. Основано на материалах: Б. Чау. Эволюция силикон-гидрогелевых линз, Contact Lens Spectrum, июнь 2008; Николь Карнт – Б, Оптом. Силикон-гидрогелевые линзы 3-го поколения, май 2008. 1. Содержание воды 55%. 2. Bregman NA. Beyond flux: общее потребление кислорода роговицей как индекс насыщения роговицы кислородом во время ношения линзы. Optom Vis Sci. 2005; 82(6):467-472. 3. УФ-фильтр класса I блокирует более чем 90% УФ-А-лучей и 99% УФ-В-лучей. Внимание: линзы с УФ-фильтром не являются заменой очков с УФ-защитой, поскольку не полностью закрывают глазное яблоко и прилегающие зоны. Продолжайте использовать средства защиты глаз от УФ-излучения согласно рекомендациям специалиста. Согласно материалам CooperVision (2019) и статье: УФ-защита в контактных линзах, American Optometric Association, <https://www.aoa.org/patients-and-public/caring-for-your-vision/uv-protection/uv-protection-with-contact-lenses>.

ООО «КуперВижн РУС» (ОГРН 1097746396945), расположенное по адресу:
Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, эт. 17, пом. 1, ком. 1707а, тел. +7 (495) 995-80-15 – официальный дистрибьютор CooperVision Manufacturing Limited.

Линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Avaira Vitality, линзы контактные мягкие корректирующие дневного ношения Avaira Vitality toric per. уд. № РЗН 2018/7723 от 18 октября 2018 года. AV/11.19/1

Информация для медицинского специалиста

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ /НЕОКРАШЕННЫЕ/

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ
Clear 58 UV	CLEARLAB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Clear all-day	CLEARLAB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Dailies Aqua Comfort Plus	ALCON	ОДНОДНЕВНЫЕ
Dailies Aqua Comfort Toric	ALCON	ТОРИЧЕСК/ОДНОДНЕВ.
Diamond 55	HORIEN	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Extreme H ₂ O 54	HYDROGEL VISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Horien 1 Day	HORIEN	ОДНОДНЕВНЫЕ
IQ Lens Oxygen 1-day	UNICON OPTICAL	ОДНОДНЕВНЫЕ
Maxima 38 FW	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Maxima 55 Comfort +	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Maxima 55 UV Aspheric	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Menisoft	MENICON	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Miru 1-day Menicon Flat Pack	MENICON	ОДНОДНЕВНЫЕ
Morning Q38	INTEROJO	ТРАДИЦИОННЫЕ
Morning Q55	INTEROJO	ТРАДИЦИОННЫЕ
New Green	NEOVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
NewGen 38	BESCON	ТРАДИЦ./ПЛАН. ЗАМ.
NewGen 38	BESCON	ТРАДИЦИОННЫЕ
NewGen 55	BESCON	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
OKVision Infniti	NEW BIO	ТРАДИЦИОННЫЕ
OKVision One Touch 1 Day	OKVISIONE [KONTLENS, INTEROJO]	ОДНОДНЕВНЫЕ
OKVision Prima	OKVISIONE [NEW BIO]	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
OKVision Prima Bio Toric	KONTAKT LENS	ТОРИЧЕСКИЕ

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ
OKVision Prima Bio Bi-focal	INTEROJO	БИФОКАЛЬНЫЕ
OKVision Season	OKVISIONE [NEW BIO]	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Optima FW	BAUSCH + LOMB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Proclear 1 day	COOPERVISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
Proclear	COOPERVISION	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Sea Clear Vial	GELFLEX	ТРАДИЦИОННЫЕ
Sea Clear, Sea Clear Plus	GELFLEX	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Sofclear, Sofclear Plus	GELFLEX	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Sofclear Comfort with BioMoist	GELFLEX	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Sofclear Comfort 1 day with Biomoist	GELFLEX	ОДНОДНЕВНЫЕ
Sofclear One day	GELFLEX	ОДНОДНЕВНЫЕ
SofLens 59	BAUSCH + LOMB	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
SofLens Daily Disposable	BAUSCH + LOMB	ОДНОДНЕВНЫЕ
SofLens Toric	BAUSCH + LOMB	ТОРИЧЕСКИЕ
VizoTeque Comfortex	MPG&E	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
VizoTeque Comfortex 1-Day	MPG&E	ОДНОДНЕВНЫЕ
Zeiss Contact Day 1	WOEHLK	ОДНОДНЕВНЫЕ
Zeiss Contact Day 1 toric	WOEHLK	ТОРИЧЕСК/ОДНОДН.
Zeiss Contact Day 1 multifoc.	WOEHLK	МУЛЬТИФОК/ОДНОДН.
Zeiss Contact Day 30 compatic	WOEHLK	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
Zeiss Contact Day 30 compatic toric	WOEHLK	ТОРИЧЕСКИЕ
Офтальмикс Баттерфляй Clear	POLYTOUCH CONT.	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ

ЦВЕТНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	СРОК ЗАМЕНЫ
Adore	EYEMED	КВАРТАЛЬНЫЕ
Adria Color (Elegant, Neon...)	INTEROJO	КВАРТАЛЬНЫЕ
AIR OPTIX Colors	ALCON	1 МЕСЯЦ
Amore	MAXLOOK	КВАРТАЛЬНЫЕ
ColorNova	INNOVA VISION	1 МЕСЯЦ
ColorNova 1-day	INNOVA VISION	ОДНОДНЕВНЫЕ
Eye Free Colors	G&G	КВАРТАЛЬНЫЕ
FreshLook ColorBlends	ALCON	1 МЕСЯЦ
FreshLook Colors	ALCON	1 МЕСЯЦ
FreshLook Dimensions	ALCON	1 МЕСЯЦ
Hera	DREAMCON	КВАРТАЛЬНЫЕ
IQ Lens Amore	MAXLOOK	КВАРТАЛЬНЫЕ
Neo Cosmo	NEOVISION	КВАРТАЛЬНЫЕ
Ningaloo	GELFLEX	1 МЕСЯЦ
OKVision Fusion	OKVISIONE [NEW BIO]	КВАРТАЛЬНЫЕ
OKVision Fusion Nuance	OKVISIONE	2 НЕДЕЛИ

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	СРОК ЗАМЕНЫ
OKVision Infniti	NEW BIO	6 МЕСЯЦЕВ
Sofclear COLOURS	GELFLEX	КВАРТАЛЬНЫЕ
Sofclear Enhance with Biomoist	GELFLEX	ОДНОДНЕВНЫЕ
SofLens Natural Colors	BAUSCH + LOMB	1 МЕСЯЦ
Tutti One-Day	BESCON	ОДНОДНЕВНЫЕ
Tutti	BESCON	КВАРТАЛЬНЫЕ
Wincolor	HORIEN	1 МЕСЯЦ
Офтальмикс Баттерфляй One Day	POLYTOUCH CONT.	ОДНОДНЕВНЫЕ
Офтальмикс Баттерфляй One Month	POLYTOUCH CONT.	КВАРТАЛЬНЫЕ
Офтальмикс Баттерфляй 1Т	POLYTOUCH CONT.	КВАРТАЛЬНЫЕ
Офтальмикс Баттерфляй 3Т	POLYTOUCH CONT.	КВАРТАЛЬНЫЕ
Офтальмикс Баттерфляй Gold	POLYTOUCH CONT.	КВАРТАЛЬНЫЕ
Офтальмикс Баттерфляй Crazy	POLYTOUCH CONT.	КВАРТАЛЬНЫЕ
Офтальмикс Colors	MI GWANG	КВАРТАЛЬНЫЕ
Офтальмикс Colors Galaxy	MI GWANG	КВАРТАЛЬНЫЕ

МЯГКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ	ЛИНЗЫ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ТИП ЛИНЗ
КОНКОР Benz 38%	Фирма КОНКОР /Вологда/	ТРАДИЦИОННЫЕ	OKVision OKV-SL торические	ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНКОР Benz UV 38%	Фирма КОНКОР /Вологда/	ТРАДИЦИОННЫЕ	OKVision OKV-SL EyeBrid	ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гибридные)
КОНКОР Benz 56% MF	Фирма КОНКОР /Вологда/	ТРАДИЦИОННЫЕ	OKVision OKV-SL SoftK	ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (для корр. кератоконуса)
КОНКОР Contaflex 38	Фирма КОНКОР /Вологда/	ТРАДИЦИОННЫЕ	OKVision OKV-SL мультифокальные	ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНКОР Contaflex 67	Фирма КОНКОР /Вологда/	ТРАДИЦИОННЫЕ	OKVision Defocus Control бифокальные	ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНКОР Definitive (Si-H)	Фирма КОНКОР /Вологда/	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Optimed	ОПТИМЕДСЕРВИС /Уфа/	ТРАДИЦИОННЫЕ
КОНКОР окрашенные	Фирма КОНКОР /Вологда/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ			
КОНКОР торические	Фирма КОНКОР /Вологда/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ			
КОНКОР для коррекции кератоконуса	Фирма КОНКОР /Вологда/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ			
OKVision OKV-SL	ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ			

«ВЕСТНИК ОПТОМЕТРИИ»

ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ-2020

В годовой комплект входят 7 номеров журнала и 2 Приложения (Справочные таблицы по контактными линзам и Каталог средств ухода за контактными линзами).

Стоимость подписки для физических лиц (врачей, оптиков и др.) составляет **800 руб.** Физическое лицо может перевести указанную сумму на наш счет через любое **отделение Сбербанка РФ или почту**. Адрес доставки может быть любым - рабочий или домашний. Обращаем Ваше внимание, что от одного физического лица принимается подписка **не более, чем на 2 годовых комплекта**.

Стоимость подписки для юридического лица (с оплатой по безналичному расчету) составляет **1200 руб.** Обращаем внимание, что с января 2020 г. ООО «Линзпринт» работает по упрощенной системе налогообложения (т.е. без НДС).

Указанная выше цена действительна только для российских подписчиков.

Скачать счет на подписку можно на сайте: www.optometry.ru или www.optica4all.ru («Оптика для Всех»).

Подписчики журнала могут также получать pdf-версию журнала. Для этого необходимо прислать свой e-mail адрес на нашу почту optometry@mail.ru. По вопросу подписки только на pdf-версию журнала обращаться в Редакцию.

После оплаты необходимо позвонить в редакцию и сообщить номер платежного документа и дату оплаты, а также адрес получателя и его телефон.

Адрес Редакции: 107076, г. Москва, ул.Электровзаводская, д.29, стр.1, офис 110
Телефон: (495) 644-73-90, 964-19-28 www.optometry.ru www.optica4all.ru e-mail: optometry@mail.ru



Добро пожаловать в ОПТИК-КЛУБ

Официальный дистрибьютор
Alcon, Johnson&Johnson,
Bausch&Lomb, Maxima

Преимущества работы с ОПТИК-КЛУБОМ

*широкий спектр продукции
отлаженная логистика
дружелюбный опытный персонал
безупречный сервис*



123290, Москва,
2-я Магистральная улица,
д. 14г стр.1 БЦ «МЕЛА»

(495) 644-48-87
company@optic-club.ru

Контактные линзы и средства по уходу от ведущих мировых производителей

Alcon®

ОПТИ-ФРИ PureMoist 120/300 мл
ОПТИ-ФРИ Реплениш 90/300 мл
ОПТИ-ФРИ Экспресс 120/355 мл
AOSEPT Plus 90/360 мл
AOSEPT Plus with HydraGlyde 90/360 мл **NEW**
ОПТИ-FREE PRO (капли) 10 мл **NEW**
ОПТИ-ФРИ увлажняющие капли 15 мл

AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE 3/6 линз **NEW**
AIR OPTIX AQUA 3/6 линз
AIR OPTIX AQUA Multifocal 3 линзы
AIR OPTIX for Astigmatism 3 линзы
AIR OPTIX Night&Day AQUA 3 линзы
AIR OPTIX Colors 2 линзы
Dailies Total 1 30/90 линз **NEW**
Dailies Aqua Comfort Plus 30/90 линз
Dailies Aqua Comfort Toric 30 линз
FreshLook Colors / ColorBlends 2 линзы
FreshLook Dimensions 2/6 линз



ACUVUE

BRAND CONTACT LENSES

Johnson & Johnson

Acuvue 2 6 линз / Acuvue Advance 6 линз
Acuvue Oasys with HydraClear Plus 6/12/24 линз
Acuvue Oasys for Astigmatism 6 линз
1-Day Acuvue Moist 30/90/180 линз
1-Day Acuvue Moist for Astigmatism 30/90 линз
1-Day Acuvue Moist Multifocal 30 линз **NEW**
1-Day Acuvue TruEye 30/90/180 линз
1-Day Acuvue Define 30 линз
1-Day Acuvue Oasys with Hydraluxe 30 линз **NEW**
1-Day Acuvue Oasys with Hydraluxe for Astigmatism 30 линз



BAUSCH + LOMB



Ultra 3 линзы **NEW**
Biotrue ONE Day 30 линз
PureVision 6 линз
PureVision 2 HD 6 линз
PureVision 2 HD for Astigmatism 3 линзы
PureVision Multi-Focal 6 линз
SofLens 59 6 линз
SofLens Daily Disposable 30/90 линз
SofLens Toric 6 линз
SofLens Natural Colors 2 линзы
Optima FW 4 линзы
Biotrue 120/300 мл
ReNu MPS 120/240/300 мл
ReNu MultiPlus 60/120/240/300 мл
ReNu MultiPlus (капли) 8 мл
Артелак Баланс (Уно)/Всплеск (Уно) 10 мл/0,5 мл №30 (капли)

MAXIMA™

Maxima 1-Day Premium 30 линз
Maxima Si Hy 3 линзы
Maxima Si Hy Plus 6 линз
Maxima 38 FW 4 линзы
Maxima 55 Comfort + 6 линз
Maxima 55 UV Aspheric 6 линз

Maxima 120/250/360 мл
Maxima Elite 100/360 мл
Maxima Revital Drops (капли) 10 мл



Также в нашем ассортименте:

Аксессуары для контактных линз и Диагностические тест-полоски

Sanitelle®

нормофтал®

Медстар
Нормальное зрение без очков

OPTIMED®

Colens

Ваш КЛУБ рядом с Вами



Москва: тел./факс (495) 644-48-87, company@optic-club.ru
Санкт-Петербург: тел. (812) 213-35-31, spb@optic-club.ru
Воронеж: тел./факс (4732) 33-02-63/64, voronezh@optic-club.ru
Иркутск: тел. (3952) 77-01-55, irkutsk@optic-club.ru
Казань: тел./факс (843) 527-67-96, 560-40-64, kazan@optic-club.ru

Саратов: тел. (8452) 57-64-95, факс (8452) 57-64-96, saratov@optic-club.ru
Уфа: тел. (347) 246-17-51, факс (347) 284-54-36, ufa@optic-club.ru
Хабаровск: тел. (4212) 75-44-43, habarovsk@optic-club.ru
Ярославль: тел./факс (4852) 26-64-06/07, yaroslavl@optic-club.ru
Красноярск: тел. (391) 268-97-96, krasnoyarsk@optic-club.ru

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОДНОДНЕВНЫЕ ЛИНЗЫ (СФЕРИЧЕСКИЙ/АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
ALCON /США/	Dailies Total 1 тонируются, водоградиентные линзы	дневной; замена через 1 день	Делефилкон А, силикон- гидрогель внутри , гидрогель на поверхности, воды от 33% до 96% (содержит фосфатидилхолин)	14,1	8,5	-0,50 ÷ -6,00 +0,50 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,09	140 (156)	Блистер 30 и 90 шт.
	Dailies Aqua Comfort Plus тонируются	дневной; замена через 1 день	Нелфилкон А, 69%, FDA 2 <i>Зуважители: ПВА, ПГМЦ, ПЭГ</i>	14,0	8,7	+0,50 ÷ +6,00 -0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,10	26 (26)	Блистер 30 и 90 шт.
BAUSCH + LOMB /США/	Biotruc ONE Day УФ-защита, тонируются, обе поверхности асферические	дневной; замена через 1 день	Гипергель Незофилкон А, 78%, FDA 2	14,2	8,6	-0,25 ÷ -6,25 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D) +0,25 ÷ +6,0 (шаг 0,25D)	0,1	42 (42)	Блистер 30 и 90 шт.
	SofLens Daily Disposable тонируются, обе поверхности асферические	дневной; замена через 1 день	Хилафилкон Б, 59%, FDA 2	14,2	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	0,09	22 (24)	Блистер 30 и 90 шт.
CLEARLAB /СИНГАПУР/	Clear 1-day тонируются	дневной; замена через 1 день	Хайоксифилкон, 58%, FDA 2 <i>(биосовместимый)</i>	14,2	8,7	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -10,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,09	19,9 (22,1)	Блистер 6 шт.
	Clearday BEYOND 1-day УФ-защита, тонируются	дневной; замена через 1 день	Авефилкон А, силикон- гидрогель , 60% <i>(биосовместимый)</i>	14,2 (-) 14,3 (+)	8,6	-0,00 ÷ -6,00 +0,25 ÷ +4,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +4,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,07	88 (126)	Блистер 30 шт.
COOPERVISION /США/	clariti 1 day УФ-защита, обе поверхности асферические	дневной; замена через 1 день	Сомофилкон А, силикон- гидрогель , 56%	14,1	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25 D) +6,50 ÷ +8,00 -6,50 ÷ -10,00 (шаг 0,50 D),	0,07	60 (86)	Блистер 30 шт.
	MyDay daily disposable УФ-защита, тонируются, передняя асферическая поверхность	дневной; замена через 1 день	Стенфилкон А, силикон- гидрогель , 54%	14,2	8,4	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25) -6,5 ÷ -12,0 +5,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,08	80 (100)	Блистер 30 шт.
	Proclear 1 day тонируются	дневной; замена через 1 день	Омафилкон А, 60%, FDA 2, <i>(биосовместимый)</i>	14,2	8,7	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +5,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,09	25 (28)	Блистер 30 шт.
	Maxima 1-Day Premium тонируются, асферический дизайн	дневной; замена через 1 день	Филкон II 3, силикон- гидрогель , 56%	14,1	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25) -6,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (86)	Блистер 30 шт.

Продолжение на стр. 10

ЛИНЗЫ, КОТОРЫЕ НЕ ЧУВСТВУЕШЬ¹

9 из 10


пациентов подтверждают:
линзы DAILIES TOTAL1® настолько комфортны,
что не чувствуются на глазу¹

КАК ЭТО ВОЗМОЖНО?

Благодаря уникальной технологии**, обеспечивающей
максимальную стабильность слезной пленки²

УДЕРЖИВАЕТ

Ультрагидрофильный гель с влагодержанием, достигающим **99,6%**³, надежно **удерживает слезу²** на поверхности линзы

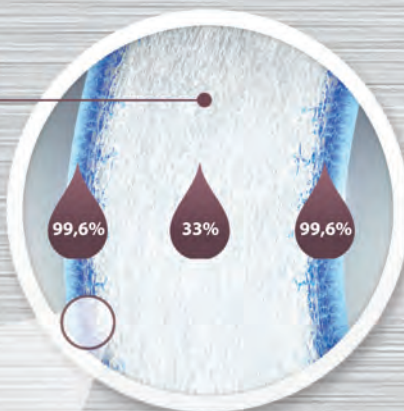

SmartTears™

ВОССТАНАВЛИВАЕТ

Технология «Умная Слеза»:
Фосфатидилхолин – естественный компонент слезы человека.

- интуитивно выделяется из линзы в слезную пленку
- **восстанавливает** липидный слой
- **уменьшает испарение** слезы⁴.

ALCON® – № 1 В ОФТАЛЬМОЛОГИИ*

* Согласно данным базы ООО «Ай Эм Эс Хэлс» «Розничный аудит ГЛС и БАД в РФ», компания Алкон® является лидером продаж в денежном выражении в рублях в розничных ценах в группе S01 «Препараты для лечения заболеваний глаз» (классификация EphMRA) по итогам 2017 года

**Патент WO2012/016096 A1 от 02.02.2012. 1. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient disposable contact lens. Clin Optom. 2014; 6:17-23. 2. Varikooty J, Schulze MM, Dumbleton K, Keir N, Woods CA, Fonn D, Jones LW. Clinical Performance of Three Silicone Hydrogel Daily Disposable Lenses. Optometry and Vision Science. 2015;92(3):301-311 3. Dunn A, et al. Lubricity of Surface Hydrogel Layers. Tribology Letters. 2013;02/01 2013;49(2):371-378. 4. Pitt, et al. Loading and Release of a Phospholipid From Contact Lenses. Optom Vis Sci.88(4).2011. 5. Вестник Оптометрии. Контактные линзы – справочные таблицы. 2018.

«Алкон», дивизион компании «Новартис» 983584RU062018 125315, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 72, корп. 3
Тел.: +7 (495) 775-68-69; +7 (495) 961-13-33. Факс: +7 (495) 961-13-39



Первые и единственные⁵ водоградиентные контактные линзы с технологией восстановления слезной пленки⁴

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОДНОДНЕВНЫЕ ЛИНЗЫ (СФЕРИЧЕСКИЙ/АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
COOPERVISION /США/	Офтальмикс ONE DAY УФ-защита, обе поверхности асферические	дневной; замена через 1 день	Сомофилкон А, силикон-гидрогель, 56%	14,1	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +6,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	60 (86)	Блистер 30 шт.
GELFLEX /АВСТРАЛИЯ/	Sofclear One day УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1 день	Метафилкон Б, 57%, FDA 4	14,3	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (31,6)	Блистер 12 и 30 шт.
	Sofclear Comfort 1day with Biomoist УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1 день	Метафилкон Б, 57%, FDA 4 <i>увлажняющая добавка Biomoist</i>	14,3	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -15,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,06	- (31,6)	Блистер 30 шт.
HORIEN /КИТАЙ/	Horien 1 Day УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1 день	Окуфилкон Д, 55%, FDA 4	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,06	21,7	Блистер 10 и 30 шт.
INTEROJO /КОРЕЯ/	Adria Go УФ-защита, тонированы, асферическая передняя поверхность	дневной; замена через 1 день	Биоксифилкон А, 58%, FDA 2	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	0,07	27 (-)	Блистер 5, 30 и 90 шт.
JOHNSON & JOHNSON /США/	1-Day Acuvue Moist УФ-защита (2 класс), тонированы, «123» индикатор стороны	дневной; замена через 1 день	Этафилкон А, 58%, FDA 4 <i>внутренний увлажняющий компонент</i>	14,2	8,5; 9,0	-0,50 ÷ -6,00 +0,50 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	0,084	21,4 (25,5) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 10, 30, 90 и 180 шт.
	1-Day Acuvue TruEye УФ-защита (1 класс), тонированы, «123» индикатор стороны	дневной; замена через 1 день	Нарафилкон А, силикон-гидрогель, 46% <i>внутренний увлажняющий компонент</i>	14,2	8,5; 9,0	-0,50 ÷ -6,00 +0,50 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	0,085	100 (118) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 10, 30, 90 и 180 шт.
	Acuvue Oasys 1-Day УФ-защита (1 класс), тонированы, «123» индикатор стороны	дневной; замена через 1 день	Сенофилкон А, силикон-гидрогель, 38% <i>внутренний увлажняющий компонент</i>	14,3	8,5; 9,0	-0,50 ÷ -6,00 +0,50 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) +6,50 ÷ +8,00 -6,5 ÷ -12,00 (шаг 0,50D)	0,085	103 (121) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 30 шт.
MENICON /ЯПОНИЯ/	Miru 1-day Menicon Flat Pack тонированы, асферический дизайн	дневной; замена через 1 день	Хайоксифилкон А, 57%, FDA 2	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 +0,5 ÷ +4,0 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,10	25,38 -	Блистер 30 шт.
MPG&E /ГЕРМАНИЯ/	VizoTeque Vero One УФ-защита, асферический дизайн	дневной; замена через 1 день	Филкон I, силикон-гидрогель, 47%	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25) -6,5 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (171)	Блистер 30 шт.
	VizoTeque Comfortex 1-day УФ-защита, асферический дизайн	дневной; замена через 1 день	Хайоксифилкон А, 58%, FDA 2, <i>биосовместимый</i>	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,09	- (22)	Блистер 30 шт.

Продолжение на стр. 12

Выбираете, какие линзы предложить современным пациентам?



УТРО



ДЕНЬ



ВЕЧЕР

ACUVUE OASYS® 1-DAY с технологией HydraLuxe® обеспечат яркое, чёткое зрение и непревзойдённый комфорт даже в цифровой среде^{1,2}



1-DAY (англ.) – однодневные. * Исследование проводилось с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. среди 1050 специалистов по коррекции зрения в США, России, Японии и Южной Корее, совокупная доля рынков которых составляет 2/3 розничных продаж контактных линз в мире. Данные в файлах компании Johnson&Johnson Vision, 2017.

1. Мак-Парланд М., Полл Б., Шнайдер К. Новые линзы для пациентов с напряжённым ритмом жизни. Вестник оптометрии, 2016, 6: 34–38.

2. В 23 клинических исследованиях, опубликованных на www.clinicaltrials.gov, семейство контактных линз ACUVUE OASYS® ни разу не было превзойдено по показателю комфорта никакими другими контактными линзами. www.clinicaltrials.gov – сайт Национального института здоровья (США). В 23 клинических исследованиях оценивался субъективный комфорт в качестве первичной и вторичной конечной точки для ACUVUE OASYS® с технологией HYDRACLEAR® Plus или ACUVUE OASYS® 1-Day с технологией HydraLuxe™. Обзор выполнен 2/08/2018.

© 2019, ООО «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Рег. уд. № РЗН 2016/4406 от 06.04.2016 г., № ФСЗ 2010/07714 от 02.03.2017 г.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОДНОДНЕВНЫЕ ЛИНЗЫ (СФЕРИЧЕСКИЙ/АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
OKVISIONE /ИТАЛИЯ/	OKVision One Touch 1 Day УФ-защита, тонированы, асферический дизайн	дневной; замена через 1 день	Хайоксифилкон А, 58%, FDA 2, (с гиалуронатом натрия)	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,06	19,9 (33,1)	Блистер 30 шт.
PEGAVISION /ТАЙВАНЬ/	Aquamax 1-Day УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1 день	Этафилкон А, 58%, FDA 4	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +4,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (25)	Блистер 30 шт.
	Aquamax 1-Day Vita УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1 день	Этафилкон А, 58%, FDA 4 (с витаминами)	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +4,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (25)	Блистер 30 шт.
UNICON OPTICAL /ТАЙВАНЬ/	IQ Lens Oxygen 1-day УФ-защита (II)	дневной; замена через 1 день	Этафилкон А с гиалуроновой кислотой, 58%, FDA 4	14,2	8,7	0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,09	24 (30)	Блистер 30 шт.
WOENLK /ГЕРМАНИЯ/	Zeiss Contact Day 1 УФ-защита (1 класс), тонированы, индикатор стороны (OK 880)	дневной; замена через 1 день	Дейфилкон А, биогидрогель 42,9%, би-ионный	14,2	8,8	+8,00 ÷ -16,00 (шаг 0,25D)	0,08	- (42,9)	Блистер 32 шт.


ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ОПТОМЕТРИИ»

[WWW.OPTICA4ALL.RU](http://www.optica4all.ru)

«ОПТИКА ДЛЯ ВСЕХ»

Mail-ВЕСТНИК – сервис *e-mail* рассылки новостей

Mail-ВЕСТНИК - это оперативная доставка СПЕЦИАЛИСТАМ последних новостей из мира оптики и бизнес-новостей российских компаний

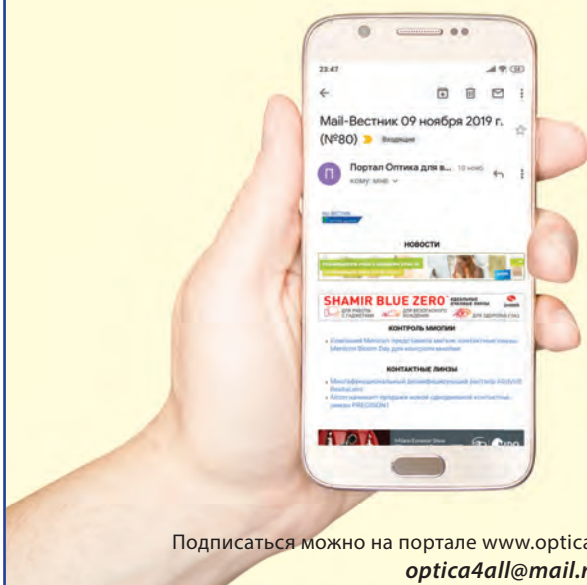

Подписавшись на электронную рассылку **Mail-ВЕСТНИК**, вы сможете оперативно узнавать:

- о новой продукции (очковых и контактных линзах, средствах ухода за контактными линзами, очковых коллекциях и оборудовании)
- о проведении конференций, выставок, семинаров
- о бизнес-предложениях и новых проектах
- о приеме на работу

Кроме того, в рассылке мы сообщаем о наиболее интересных и полезных для практической работы публикациях журнала «Вестник оптометрии», размещенных в свободном доступе на портале «Оптика для всех»

Подписывайтесь на Mail-ВЕСТНИК!

Подписаться можно на портале www.optica4all.ru, или пришлите свой e-mail адрес на нашу почту:
optica4all@mail.ru или optica4all@gmail.com

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ (СФЕРИЧЕСКИЙ/АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
ALCON /США/	AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE тонируются, асферический дизайн передней и задней поверхности	дневной, гибкий, пролонгирован- ный; замена через 1 мес.	Лотрафилкон Б, силикон- гидрогель , 33% (технология за- щиты поверхности SmartShield, тех- нология длитель- ного увлажнения HydraGlyde)	14,2	8,6	+6,00 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,50 ÷ -12,00 (шаг 0,50D) +6,50 ÷ +8,00 (шаг 0,50D)	0,08	110 (138)	Блистер 3 шт., 6 шт.
	AIR OPTIX AQUA тонируются, асферический дизайн передней и задней поверхности	дневной, гибкий, пролонгирован- ный; замена через 1 мес.	Лотрафилкон Б, силикон- гидрогель , 33% (технология за- щиты поверхности SmartShield)	14,2	8,6	-0,25 ÷ -8,00 +0,25 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -8,50 ÷ -10,00 (шаг 0,50D)	0,08	110 (138)	Блистер 3 шт., 6 шт.
	AIR OPTIX Night&Day AQUA тонируются, асферический дизайн передней и задней поверхности	дневной, гиб- кий, пролон- гированный; непрерывный до 30 суток; тера- певтическое применение; замена через 1 мес.	Лотрафилкон А, силикон- гидрогель , 24% (технология за- щиты поверхности SmartShield)	13,8	8,4; 8,6	+0,25 ÷ +6,0 -0,00 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,08	140 (175)	Блистер 3 шт.
BAUSCH + LOMB /США/	Bausch+Lomb ULTRA тонируются, обе поверхности асферические	дневной; замена через 1 мес.	Самфилкон А, силикон- гидрогель , 46% (гидрофильный силикон – технология MoistureSeal)	14,2	8,5	-6,00 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0,5D) plano	0,07	114 (163)	Блистер 3 шт.
	Optima FW тонируются	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38,6%, FDA 1	14,0	8,4; 8,7	-0,25 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	0,035	8,5 (24,3)	Блистер 4 шт.
	PureVision тонируются, передняя асферическая поверхность	дневной, гиб- кий, пролонги- рованный; не- прерывный до 30 суток; замена через 1 мес.	Балафилкон А силикон- гидрогель , 36%	14,0	8,6 8,3 <i>(только для диапазона -0,25 ÷ -6,00)</i>	-6,00 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0,5D) plano <i>(терпевтиче- ские линзы)</i>	0,09	91 (112) (101 с поправкой на край)	Блистер 6 шт.
	PureVision 2 HD тонируются, обе поверхности асферические	дневной, гиб- кий, пролонги- рованный; не- прерывный до 30 суток; замена через 1 мес.	Балафилкон А силикон- гидрогель , 36% <i>(технология увлажнения ComfortMoist)</i>	14,0	8,6	-6,00 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0,5D) plano <i>(терпевтиче- ские линзы)</i>	0,07	91 (130)	Блистер 6 шт.
	SofLens 59 тонируются, задняя асферическая поверхность	дневной; замена через 1 мес.	Хилафилкон Б, 59%, FDA 2	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 +0,50 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	0,14	22	Блистер 6 шт.
BESCON /КОРЕЯ/	NewGen 38 тонируются	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-0,5 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,00 ÷ -15,00 +1,0 ÷ +10,0 (шаг 0,5D)	0,065	10 (15,5)	Блистер 4 шт.
	NewGen 55 УФ-защита, тонируются	дневной; замена через 1 мес.	Вифилкон, 55%, FDA 4	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5 D)	0,08	16	Блистер 6 шт.
CLEARLAB /СИНГАПУР/	Clear 55 A Clear 55 A UV тонируются, асферический дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Метафилкон А, 55%, FDA 4	14,5	8,7	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,09	19,97 (23,28)	Блистер 6 шт.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ (СФЕРИЧЕСКИЙ/АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
CLEARLAB /СИНГАПУР/	Clear 58 UV УФ-защита, тонированы	дневной, гибкий; замена через 1 мес.	Этафилкон А, 58%, FDA 4	14,0 (-) 14,5 (+)	8,3; 8,7	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -10,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	19,9 (25,23)	Блистер 6 шт.
	Clear all-day тонированы, асферический дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Хайоксифилкон, 57%, FDA 2 <i>биосовместимый</i>	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,09	19,9 (22,1)	Блистер 6 шт.
	Clearday BEYOND УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Авефилкон А, силикон-гидрогель , 60% <i>(биосовместимый)</i>	14,2 (-) 14,3 (+)	8,6	-0,00 ÷ -6,00 +0,25 ÷ +4,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +4,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,07	88 (126)	Блистер 6 шт.
COOPERVISION /США/	Avaira УФ-защита, тонированы, асферический дизайн	дневной, гибкий; замена через 1 мес.	Энфилкон А, силикон-гидрогель , 46%	14,2	8,5 (-) 8,4 (+)	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +5,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,08	100 (125)	Блистер 6 шт.
	Avaira Vitality УФ-защита, тонированы, асферический дизайн	дневной, замена через 2 недели	Фанфилкон А, силикон-гидрогель , 55%	14,2	8,4	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +5,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,08	90 (110)	Блистер 6 шт.
	Biofinity тонированы, асферический дизайн	дневной, пролонгированный, непрерывный; замена через 1мес.	Комфилкон А силикон-гидрогель , 48%	14,0	8,6	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +5,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,08	128 (160)	Блистер 3 и 6 шт.
	Biofinity XR тонированы, расширенный диапазон оптич. силы, асферический дизайн	дневной, пролонгированный, непрерывный; замена через 1мес.	Комфилкон А силикон-гидрогель , 48%	14,0	8,6	+8,50 ÷ +15,0 -12,5 ÷ -20,0 (шаг 0,5D)	0,08	128 (197; для -12,5D)	Блистер 3 шт.
	Biomedics 55 Evolution asphere УФ-защита, тонированы, асферический дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Окуфилкон Д, 55%, FDA 4	14,2	8,6 (-); 8,9 (-) 8,8 (+)	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) +5,0 ÷ +8,0 -6,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,07	19 (27)	Блистер 6 шт.
	clariti elite УФ-защита, обе поверхности асферические	дневной; замена через 1 мес.	Сомофилкон А, силикон-гидрогель , 56%	14,1	8,6	+6,00 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,5 ÷ -10,0 +6,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	60 (86)	Блистер 6 шт.
	Proclear тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Омафилкон Б, 62%, FDA 2	14,2	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -20,0 +6,5 ÷ +20,0 (шаг 0,5D)	0,065	27 (36)	Блистер 6 шт.
	MAXIMA 38 FW тонированы	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,04	9,0 (23,5)	Блистер 4 шт.
	MAXIMA 55 UV Aspheric УФ-защита, тонированы	дневной, гибкий; замена через 1 мес.	Окуфилкон Д, 55%, FDA 4	14,2	8,6; 8,9 (-) 8,8 (+)	-0,50 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,0 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	19,7 (28,2)	Блистер 6 шт.
MAXIMA 55 Comfort+ тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Хайоксифилкон А, 58%, FDA 2	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	19,85 (24,81)	Блистер 6 шт.	

Продолжение на стр. 16

Многофункциональный раствор

Hy-Care

с гиалуроновой кислотой
для естественного комфорта



Hy-Care демонстрирует меньшее
роговичное прокрашивание
при сравнении с Biotrue®¹

Доступен во флаконах 360/250/100 мл



Содержит гиалуроновую кислоту —
природный увлажнитель, входящий
в состав слезы человека²;



Антибактериальный контейнер
с ионами серебра;



Мощная дезинфекция и одновременно
щадящая глаз формула³;



Повторяет pH слезы⁴.

1. Отчет о клиническом исследовании, S12-519b. Клиническое сравнение Biotrue и Hy-Care растворов, сентябрь 2013 г. Таблица 11, стр. 20. Hy-Care демонстрирует более низкие уровни роговичного окрашивания — 0,27 по шкале прокрашивания по Н. Эфрону. 2. Гоа К.Л. и Бенфилд П. Исследование — Гиалуроновая кислота. Лекарства. 1994; 47(3):536-566. 3. Данные исследований CooperVision, 2011. 4. Абельсон М.Д., Уделл, И.Ю. и Уэстон Дж. Сравнения с pH нормальной человеческой слезы путем непосредственного измерения. Архив офтальмол. 1981, февраль; 99(2):301.

ООО «КуперВижн РУС» (ОГРН 1097746396945), расположенное по адресу:
Москва, Пресненская наб., д. 6. стр. 2, эт. 17, пом. I, ком. 1707а, тел: +7 (495) 995-80-15 – официальный дистрибьютор CooperVision Manufacturing Limited.

Раствор многофункциональный Hy-Care для контактных линз рег. уд. № ФСЗ 2012/11682 от 09.04.2018.
Информация для медицинских специалистов.
HyCare/11.19/1.



CooperVision®
Живи ярко

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ (СФЕРИЧЕСКИЙ/АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
COOPERVISION /США/	MAXIMA Si Hy тонированы, двойной асферический дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Филкон II 3, силикон- гидрогель , 58%	14,2	8,6	-0,50 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (86)	Блистер 3 шт.
	MAXIMA Si Hy Plus тонированы, двойной асферический дизайн	дневной, гибкий, замена через 1 мес.	Лотрафилкон Б, силикон- гидрогель , 33%	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	110 (138)	Блистер 6 шт.
	Офтальмикс Profi УФ-защита, обе поверхности асферические	дневной; замена через 1 мес.	Сомофилкон А, силикон- гидрогель , 56%	14,2	8,6	+6,00 ÷ -8,00 (шаг 0,25D) -8,5 ÷ -10,0 +6,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	60 (86)	Блистер 6 шт.
GELFLEX /АВСТРАЛИЯ/	Sea Clear/ Sea Clear Plus УФ-защита, тонированы, асферич. дизайн	дневной; замена через 3 мес.	Poly-HEMA, 43%, FDA 1	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D) -10,0 ÷ -20,0 (шаг 1,0D)	0,04	24,5	Блистер 3 и 6 шт.
	Sofclear Comfort with BioMoist УФ-защита, тонированы, асферич. дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Метафилкон А 55% FDA 4 <i>увлажняющая добавка BioMoist</i>	14,3	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -15,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,06	- (31,6)	Блистер 3 и 6 шт.
	Sofclear/Sofclear Plus УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Метафилкон А 55% FDA 4	14,3	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,06	- (31,6)	Блистер 3 и 6 шт.
HORIEN /ТАЙВАНЬ/	Diamond 55 тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Окуфилкон Д, 55%, FDA 4	14,2	8,6	+1,00 ÷ +5,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,07	19,7	Блистер 3 и 6 шт.
HYDROGEL VISION /США/	Extreme H ₂ O 54 тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Сополимер GMA-HEMA, 54%, FDA 2	14,2	8,6	-6,00 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	0,08	21 (29)	Блистер 6 шт.
INTEROJO /КОРЕЯ/	Adria Season тонированы, асферическая передняя поверхность	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	0,07	9 (24)	Блистер 2 и 4 шт.
	Adria Sport УФ-защита, тонированы, асферическая передняя поверхность	дневной; замена через 1 мес.	Биоксифилкон Б, 55%, FDA 2 <i>биосовместимый</i>	14,2	8,6	+6,5 ÷ +10,0 (шаг 0,5D) +6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -15,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (24)	Блистер 6 шт.
	Adria O ₂ УФ-защита, тонированы, асферическая передняя поверхность	дневной, продолжительный; замена через 1 мес.	Иннофилкон А, силикон- гидрогель , 45%	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +1,00 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	70 (100)	Блистер 2 и 6 шт.
	OKVision Fusion New УФ-защита, тонированы	дневной, гибкий; замена через 1 мес.	Иннофилкон А, силикон- гидрогель , 45%	14,2	8,6	-0,5 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,08	70	Блистер 6 шт.
JOHNSON & JOHNSON /США/	Acuvue Oasys with Hydraclear Plus УФ-защита (1 класс), тонированы, «123» индикатор стороны	<i>дневной:</i> замена через 2 недели; <i>продленное ношение:</i> замена через 1 неделю	Сенофилкон А, силикон- гидрогель , 38% внутренний увлажняющий компонент	14,0	8,4; 8,8	-6,00 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +6,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	103 (147) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 6, 12 и 24 шт.

Продолжение на стр. 18



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ РАСТВОРЫ в Европе и России¹



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
РАСТВОРЫ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ

У КАЖДОГО ПАЦИЕНТА СВОИ УНИКАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В УХОДЕ ЗА ЛИНЗАМИ.
ВОТ ПОЧЕМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТРИ ВАРИАНТА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО РАСТВОРА ОПТИ-ФРИ®

	ОПТИ-ФРИ puremoist	ОПТИ-ФРИ Реплениш	ОПТИ-ФРИ Экспресс
ДЕЗИНФЕКЦИЯ	ДВОЙНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ: ПОЛИКВАД® + АЛДОКС. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ НА УРОВНЕ ПЕРОКСИДНЫХ РАСТВОРОВ²		
ОЧИСТКА	ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЮТ ВСЕ ВИДЫ ОТЛОЖЕНИЙ – БЕЛКОВЫЕ И ЛИПИДНЫЕ^{3,4}		
УВЛАЖНЕНИЕ	16 ЧАСОВ	12 ЧАСОВ⁵	8 ЧАСОВ⁶
ЗАЩИТА	ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ⁴		

ВЫБИРАЙТЕ ОПТИ-ФРИ®, НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ПОДХОДЯЩИЙ ВАШИМ ПАЦИЕНТАМ.

Alcon

1. По данным исследования Vision Needs Monitor среди пользователей контактных линз в Европе и России, 2017. По данным независимых отраслевых исследований в России и в Европе, растворы для контактных линз ОПТИ-ФРИ® являются лидером по объему продаж в денежном выражении в категории многофункциональных растворов для контактных линз в канале оптик. по итогам 2017 г. 2. Gabriel M., M. 2. Kern J. et al. Antimicrobial properties of a novel contact lens disinfecting solution, OPTI-FREE® EverMoist®, Cont Lens Anterior Eye 2011; 34 (Suppl 1): S30-3. Campbell R., Kame G., et al. Clinical benefits of a new multi-purpose disinfecting solution in silicone hydrogel and soft contact lens users. Eye & Contact Lens 2012; 38 (2): 93-101 4. Senchyna M., et al. Characterization of a Multi-Purpose Lens Solution Designed for Silicone Hydrogel Materials. Poster presented at: ARVO; May 2010; Fort Lauderdale, FL. 5. Tomlinson A., Raled F., Velitchko Manahilov. Effect of care solutions on contact lens in-vivo wettability at insertion and end of day. Investigative Ophthalmology & Visual Science June 2013, Vol. 54, 492. 6. Wooldridge R., Howard I.S., Comparison of Two Lens Care Formulations. Contact Lens Spectrum, Issue: November 2006.

1190304RU062019
ООО «Алкон Фармацевтика», 125315, г. Москва, пр. Ленинградский, д. 72, корп. 3. Тел: +7 (495) 775-68-69; +7 (495) 961-13-33. Факс: +7 (495) 961-13-39.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ (СФЕРИЧЕСКИЙ/АСФЕРИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН)

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
MENICON /ЯПОНИЯ/	Menisoft тонированы, двойной асферический дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Мипафилкон А, 72%, FDA 2	14,2	8,6	-0,25 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	0,08	34 (43)	Блистер 3 шт.
	Miru 1 month Menicon тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Асмофилкон А, силикон- гидрогель , 40%	14,0	8,3; 8,6	-6,00 ÷ +6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -13,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (161)	Блистер 3 и 6 шт.
MPG&E /ГЕРМАНИЯ/	VizoTeque Comfortex УФ-защита, асферический дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Хайоксифилкон А, 55%, FDA 2	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (29)	Блистер 6 шт.
	VizoTeque Supreme УФ-защита	дневной; замена через 1 мес.	Генифилкон А, силикон- гидрогель , 45%	14,2	8,6	-0,5 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (100)	Блистер 6 шт.
NEOVISION /КОРЕЯ/	New Green (Blue Tint) тонированы (Neo Clean)	дневной; замена через 3 мес.	2-НЕМА, 38% - 45%, FDA 1 55%	14,0	8,6	-0,5 ÷ -10,0 -0,5 ÷ -6,0	-	-	Блистер 2 шт.
OKVISIONE /ИТАЛИЯ/	OKVision Premium SH-48 УФ-защита, асферические, тонированы	дневной; замена через 1 мес.	филкон 1, силикон- гидрогель , 48%	14,2	8,6	-0,75 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 (шаг 0,5D)	0,08	125 (150)	Блистер 6 шт.
	OKVision Prima УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 1-2 нед.	Этафилкон А, 58%, FDA 4	14,2	8,5	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,07	21,4 (30,5)	Блистер 6 шт.
	OKVision Prima Bio УФ-защита, асферические, тонированы	дневной, гибкий; замена через 1 мес.	Хайоксифилкон А, 55%, FDA 2, (с <i>гликоуронатом натрия</i>)	14,2	8,6 8,8	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -20,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,065	22,5 (34,5)	Блистер 6 шт.
	OKVision Season тонированы	дневной; замена через 3 мес.	Terpolimer, 45%, FDA 2	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -15,0 +1,0 ÷ +12,5 (шаг 0,5D)	0,06	16,5 (27,5)	Блистер 2 шт.
PEGAVISION /ТАЙВАНЬ/	Aquamax УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 2 недели	Этафилкон А, 58%, FDA 4	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (25)	Блистер 6 шт.
	Aquamax 38 УФ-защита, тонированы	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-1,0 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (15)	Блистер 4 шт.
POLYTOUCH CONTACTLENS /КОРЕЯ/	Офтальмикс Butterfly Clear	дневной; замена через 3 мес.	2-НЕМА, 42%, FDA 1	14,2	8,6	-0,50 ÷ -5,00 (шаг 0,25D) -5,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,06	9	Блистер 4 шт.
UNICON OPTICAL /ТАЙВАНЬ/	IQ Lens Oxygen Monthly УФ-защита, асферический дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Юнифилкон А, силикон- гидрогель , 43%	14,2	8,6	0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +0,5 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	0,07	60 (86)	Блистер 6 шт.
WOENLK /ГЕРМАНИЯ/	Zeiss Contact Day 30 Air УФ-защита (1 класс), тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Аэрофилкон А, силикон- гидрогель , 69%	14,2	8,5; 8,8	-6,00 ÷ +5,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +5,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,09	- (76,9)	Блистер 6 шт.
	Zeiss Contact Day 30 compatic УФ-защита (1 класс), тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Витафилкон А, биогидрогель, 54%	14,4 13,6	8,6; 8,8; 8,9 8,3	-8,00 ÷ +5,00 (шаг 0,25D) -8,0 ÷ -12,0 +5,0 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	0,09	- (22,9)	Блистер 6 шт.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТОРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Метод стабилизации	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Сфера (D)	Цилиндр (D)	Оси	t, мм (-3,00 D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
ALCON /США/	AIR OPTIX for Astigmatism тонированы	дневной; пролонгированный до 6 суток; замена через 1 мес.	Лотрафилкон Б, силикон-гидрогель , 33% (Технология защиты поверхности SmartShield)	Дизайн Precision Balance 8 4	14,5	8,7	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	10°, 20°, 30°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 150°, 160°, 170°, 180°	0,102	110 (108)	Блистер 3 шт.
	Dailies Aqua Comfort Plus Toric тонированы	дневной; замена через 1 день	Нелфилкон А, 69%, FDA 2 (Зувалжатель: ПВА, ППМЦ, ПЭГ)	Две тонкие зоны, задняя поверхность торическая, передняя лентиккулярная	14,4	8,8	+4,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75	20°, 90°, 160°, 180°	0,10	26 (26)	Блистер 30 шт.
BAUSCH + LOMB /США/	PureVision 2 HD for Astigmatism тонированы	дневной, гибкий, пролонгированный; непрерывный до 30 суток, замена через 1 мес.	Балафилкон А силикон-гидрогель , 36%	Авто-Align дизайн, задняя торическая поверхность, передняя асферическая, усовершенствованная асферика	14,5	8,9	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	0 ÷ 180° (шаг 10°)	0,10	91 (101) (91 с поправкой на край)	Блистер 3 шт.
	SofLens Toric тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Альфафилкон А, 66%, FDA 2	Lo-Torque дизайн	14,5	8,5 (эквивалентный радиус)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25; -2,75 (-)	0 ÷ 180° (шаг 10°)	0,195	32 (16,4)	Блистер 6 шт.
CLEARLAB /СИНГАПУР/	Clear 1-day toric тонированы	дневной; замена через 1 день	Хайоксифилкон, 58%, FDA 2 (биосовместимый)	Призматический балласт	14,5	8,7	-0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D)	-1,0	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°	0,09	19,85 (25,3)	Блистер 30 шт.
	Clearday BEYOND toric тонированы, УФ-защита	дневной; замена через 1 месяц	Авефилкон А, силикон-гидрогель , 60% (биосовместимый)	Динамическая стабилизация, призматический балласт	14,3	8,7	0,00 ÷ -6,00 +0,25 ÷ +4,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	0 ÷ 180° (шаг 10°)	0,09	88 (98)	Блистер 6 шт.
	Clearday BEYOND 1-DAY toric тонированы, УФ-защита	дневной; замена через 1 день	Авефилкон А, силикон-гидрогель , 60% (биосовместимый)	Динамическая стабилизация, призматический балласт	14,3	8,7	0,00 ÷ -6,00 +0,25 ÷ +4,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	0 ÷ 180° (шаг 10°)	0,09	88 (98)	Блистер 30 шт.
COOPERVISION /США/	Avaira Vitality toric тонированы, УФ-защита, асферический дизайн	дневной; замена через 2 недели	Фанфилкон А, силикон-гидрогель , 55%	Призматический балласт, задняя торическая поверхность	14,5	8,5	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	0° ÷ 180° (шаг 10°)	0,10	90 (90)	Блистер 6 шт.
	Biofinity toric тонированы	дневной, пролонгированный; непрерывный до 30 суток, замена через 1 мес.	Комфилкон А, силикон-гидрогель , 48%	Призматический балласт, задняя торическая поверхность	14,5	8,7	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +5,5 ÷ +8,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	10° ÷ 180° (шаг 10°)	0,11	128 (116)	Блистер 3 шт.
	Biofinity XR toric тонированы	дневной, пролонгированный; непрерывный до 30 суток, замена через 1 мес.	Комфилкон А, силикон-гидрогель , 48%	Призматический балласт, задняя торическая поверхность	14,5	8,7	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +6,5 ÷ +10,0 (шаг 0,5D)	для Sph -10,0 ÷ +8,0 D: -2,75 ÷ -5,75 (шаг 0,50 D); для Sph +8,5 ÷ +10,0 D: -0,75 ÷ -5,75 (шаг 0,50 D)	5° ÷ 180° (шаг 5°)	0,11	128 (116)	Блистер 3 шт.
	clariti 1 day toric УФ-защита	дневной; замена через 1 день	Сомофилкон А, силикон-гидрогель , 56%	Облегченный призмат. балласт, обе поверхн. асферич., задняя торическая	14,3	8,6	+4,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	для Sph 0,0 ÷ -6,0 D: -0,75; -1,25; -1,75 для Sph 0,0 ÷ -6,0 D: -2,25 для Sph +0,25 ÷ +4,0D: -0,75; -1,25; -1,75	10°, 20°, 60° ÷ 120°, 160° ÷ 180° (шаг 10°) 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° 20°, 70°, 90°, 100°, 110°, 160°, 180°	0,105	60 (57)	Блистер 30 шт.

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ТОРИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Метод стабилизации	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Сфера (D)	Цилиндр (D)	Оси	t, мм (-3,00 D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
JOHNSON & JOHNSON /США/	1-Day Acuvue Moist for Astigmatism тонируются, УФ-защита (2 класс), вертикальные метки на 6 и 12 ч	дневной; замена через 1 день	Этафилкон А, 58%, FDA 4 <i>внутренний увлажняющий компонент</i>	Принцип стабилизации веками	14,5	8,5	0,0 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,50 ÷ -9,00 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75 -2,25	10°, 20° 60° ÷ 120° (шаг 10°) 160°, 170°, 180° 20°, 90°, 170°, 180°	0,09	21,4 (23,7) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 30 и 90 шт.
	Acuvue Oasys 1-Day for Astigmatism тонируются, УФ-защита (1 класс), вертикальные метки на 6 и 12 ч	дневной; замена через 1 день	Сенофилкон А, силикон-гидрогель, 38% <i>внутренний увлажняющий компонент</i>	Принцип стабилизации веками	14,3	8,5	0,00 ÷ +4,0 (шаг 0,25D) 0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D)	-0,75; -1,25; -1,75 -2,25	0° ÷ 180° (шаг 10°) 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 170°, 180°	0,08	103 (129) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 30 шт.
	Acuvue Oasys for Astigmatism тонируются, УФ-защита (1 класс), вертикальные метки на 6 и 12 ч	дневной; замена через 2 недели; продленное ношение: замена через 1 неделю	Сенофилкон А, силикон-гидрогель, 38% <i>внутренний увлажняющий компонент</i>	Принцип стабилизации веками	14,5	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D) 0,00 ÷ +4,0 (шаг 0,25D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25; -2,75 -1,25; -1,75; -2,25; -2,75 -0,75; -1,25; -1,75	0° ÷ 180° (шаг 10°) 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 170°, 180° 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 170°, 180°	0,08	103 (129) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 6 шт.
KONTAKT LENS /ИТАЛИЯ/	OKVision Prima Bio Toric УФ-защита, тонируются, асферические	дневной; гибкий; замена через 1 мес.	Хайкоксифилкон А, 55%, FDA 2, (с гиалуронатом натрия)	Призматический балласт	14,2	8,6	+6,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75; -2,25	10° ÷ 180° (шаг 10°)	0,065	22,5 (34,5)	Блистер 1 и 6 шт.
MENICON /ЯПОНИЯ/	Miru 1 month Menicon for Astigmatism тонируются	дневной; замена через 1 мес	Асмофилкон А, силикон-гидрогель, 40%	Двойной вертикальный дизайн Thin Zones, Visiostable design	14,0	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75	10° ÷ 180° (шаг 10°)	0,08	- (161)	Блистер 3 и 6 шт.
WOENLK /ГЕРМАНИЯ/	Zeiss Contact Day 1 toric УФ-защита (1 кл.), тонируются, индикатор стороны (РА)	дневной; замена через 1 день	Дейфилкон А, биогидрогель, 42,9%, би-ионный	Динамический призматический балласт, верхняя стабилизация	14,2	8,8	0,00 ÷ -6,50 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	-0,75; -1,25; -1,75	20°, 90°, 160°, 180° 180°	0,07	- (42,9)	Блистер 32 шт.
	Zeiss Contact Day 30 air toric УФ-защита (1 кл.), тонируются	дневной; замена через 1 мес.	Аэрофилкон А, силикон-гидрогель, 69%	Динамический симметр. стабилизация, 2-х радиусная торич. внутр. поверхность	14,4	8,6	-6,00 ÷ +4,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -8,0 +4,0 ÷ +6,0 (шаг 0,5D)	-0,75 ÷ -2,75 (шаг 0,5 D)	10° ÷ 180° (шаг 10°)	0,11	- (76,9)	Блистер 6 шт.
	Zeiss Contact Day 30 compatic toric УФ-защита (1 кл.), тонируются	дневной; замена через 1 мес.	Витафилкон А, 54%, FDA 4	Динамический симметр. стабилизация, 2-х радиусная торич. внутр. поверхность	14,4	8,6	-6,00 ÷ +4,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -8,0 +4,5 ÷ +6,0 шаг 0,5D)	-0,75 ÷ -2,75 (шаг 0,5 D)	10° ÷ 180° (шаг 10°)	0,10	- (22,9)	Блистер 6 шт.

Семейство мягких контактных линз clearday™ Beyond от Clearlab



- Работаем только с профессионалами
- НЕ работаем с МАРКЕТПЛЕЙСАМИ
- Развиваем Ваш бизнес

- КАЧЕСТВО -

- ЗАЩИТА ВАШЕГО БИЗНЕСА -

- ЦЕНА -

clearday™
Beyond

Комфорт

- H₂O 60%
- Низкий модуль упругости 0,39 МПа

Здоровье
глаз

- Кислород 126 Dk/t
- Биосовместимость
- УФ-фильтр

Качество
зрения

- Асферический дизайн

Удобство

- LightTint

clearlab®

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Офтадерм-Логистик»

117105, Россия, Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 2, этаж цоколь, офис 2.

Тел.: +7 (495) 777-71-16 / +7(499) 404-36-46

info@fere.ru

www.офтальмикс.рф

Медстар

научно
производственная
фирма



Россия, г. Волгоград
тел.: (8443) 31-64-61
e-mail: MEDSTAR_SALES@mail.ru
8-800-777-35-40 (звонок бесплатный)

Весь спектр средств по уходу за контактными линзами



 MEDSTAR.NPF  MEDSTARNPF

WWW.MEDSTAR-NPF.RU

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Мультифокальный дизайн	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	Аддидация (D)	t, мм (-3,0 D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
ALCON /США/	AIR OPTIX AQUA Multifocal тонированы	дневной, пролонгированный до 6 суток; замена через 1 мес.	Лотрафилкон Б, силикон-гидрогель, 33% (Технология защиты поверхности SmartShield)	Precision Profile (точный оптический профиль, центр для зрения вблизи)	14,2	8,6	+6,00 ÷ -10,00 (шаг 0,25D)	LO: ≤ +1,25 MED: +1,5D...+2,0 HI: +2,25...+2,5	0,08	110 (138)	Блистер 3 шт.
	Dailies Total 1 Multifocal тонированы	дневной, замена через 1 день	Делефилкон А, силикон-гидрогель внутри, гидрогель на поверхности; от 33% до 99,6% воды (содержит фосфатидил-холин)	Precision Profile (точный оптический профиль, центр для зрения вблизи)	14,1	8,5	+6,00 ÷ -10,00 (шаг 0,25D)	LO: ≤ +1,25 MED: +1,5D...+2,0 HI: +2,25...+2,5	0,09	140 (156)	Блистер 30 шт.
BAUSCH + LOMB /США/	PureVision Multi-Focal тонированы	дневной, гибкий, пролонг.; непрерыв. до 30 сут.; замена через 1 мес.	Балафилкон А, силикон-гидрогель, 36%	Центральная зона для зрения вблизи, передняя асферическая поверхность	14,0	8,6	+6,00 ÷ -10,00 (шаг 0,25D)	Low: ≤ +1,5 High: +1,75...+2,5	0,09	91 (112)	Блистер 6 шт.
CLEARLAB /СИНГАПУР/	Clearday BEYOND 1-day multifocal тонированы, УФ-защита	дневной; замена через 1 день	Авефилкон А, силикон-гидрогель, 60% (биосовместимый)	Плавное изменение оптической силы от центральной зоны к периферии	14,2	8,6	+4,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	ADD: +1,0; +1,5; +2,0; +2,5	0,07	88 (98)	Блистер 30 шт.
COOPERVISION /США/	Biofinity multifocal тонированы	дневной, пролонгированный; непрерывный до 30 суток, замена через 1 мес.	Комфилкон А, силикон-гидрогель, 48%	D линза, N линза; технол. Balanced Progressive Technology (сферическая зона в центре и по периферии линзы)	14,0	8,6	+6,00 ÷ -10,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	+1,0; +1,5; +2,0; +2,5	0,09	128 (142)	Блистер 3 шт.
	clariti 1 day multifocal УФ-защита	дневной; замена через 1 день	Сомофилкон А, силикон-гидрогель, 56%	Прогрессивная аддидация, обе поверхности асферические	14,1	8,6	+5,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D)	Low: < +2,25 High: +2,5...+3,0	0,07	60 (86)	Блистер 30 шт.
JOHNSON & JOHNSON /США/	1-Day Acuvue Moist Multifocal УФ-защита (2 класс), тонированы, «123» индикатор стороны	дневной; замена через 1 день	Этафилкон А, 58%, FDA 4 (внутренний увлажняющий компонент)	Центральная зона для зрения вблизи (183 дизайна оптической зоны с учетом аддидации и рефракции)	14,3	8,4	+6,00 ÷ -9,00 (шаг 0,25D)	Low: +0,75... +1,25 Med: +1,5... +1,75 High: +2,00... +2,25	0,084	21,4 (25,5) (с коррекцией по границе и краю)	Блистер 30 шт.
MENICON /ЯПОНИЯ/	Miru 1 month Menicon Multifocal тонированы	дневной; замена через 1 мес.	Асмофилкон А, силикон-гидрогель, 40%	Dual Balanced Design	14,2	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -13,0 (шаг 0,5D)	Low: < +1,00 High: > +2,00	0,08	- (161)	Блистер 3 и 6 шт.
WOENLK /ГЕРМАНИЯ/	Zeiss Contact Day 1 multifocal УФ-защита (1 кл.), тонированы, индикатор стороны (1РМо)	дневной; замена через 1 день	Дейфилкон А, биогидрогель, 42,9%, би-ионный	Центральная зона для зрения вдаль	14,2	8,8	+5,00 ÷ 10,00 (шаг 0,25D)	тип А: +0,75 тип В: +1,50	0,07	- (42,9)	Блистер 32 шт.

БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
INTEROJO /КОРЕЯ/	OKVision Prima Bio Bi-focal (бифокальная линза с центром для зрения вдаль)	дневной, гибкий; замена через 1 мес.	Хайоксифилкон А, 55%, FDA 2, (с гиалуронатом натрия)	14,2	8,4	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) ADD +4,0 D	0,065	22,5 (34,5)	Блистер 6 шт.

Предложите Вашим пациентам с пресбиопией
оптимальную коррекцию зрения
новыми контактными линзами
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL



Высокое качество зрения
на любом расстоянии
независимо от степени
рефракции и аддидации¹:

- ✓ оптимальный размер
оптической зоны
- ✓ правильное положение
линзы на глазу



Новые контактные линзы
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL
обеспечивают комфорт в течение всего дня
и высокую остроту зрения на любом расстоянии¹

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза (цвета*)	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
ALCON /США/	Air Optix Colors брилл. синий, изумр.зеленый, серебр.серый, синий, зеленый, медовый, карий	дневной; замена через 1 мес.	Лотрафилкон Б, силикон-гидрогель , 33% (Технология защиты поверхности SmartShield)	14,2	8,6	0,00; -0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,00 ÷ -7,00 (шаг 0,50D)	0,08	110 (138)	Блистер 2 шт.
	FreshLook Colors гол., зел., фиалковый, гол. сапфир	дневной; замена через 1 мес.	Фемфилкон А, 55%, FDA 4 (УФ-блокатор)	14,5	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,50D)	0,05	16	Блистер 2 шт.
	FreshLook ColorBlends настоящий сапфир, бриллиантовый син., гол., зел., изумрудный зел., серебряный сер., бирюзовый, карий	дневной; замена через 1 мес.	Фемфилкон А, 55%, FDA 4 (УФ-блокатор)	14,5	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,50D)	0,05	16 (32)	Блистер 2 шт.
	FreshLook Dimensions карибиаан аква, зел. лагуна, гол. лазурь	дневной; замена через 1 мес.	Фемфилкон А, 55%, FDA 4 (УФ-блокатор)	14,5	8,6	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,50D)	0,05	16 (32)	Блистер 2 (<i>plano</i>) и 6 шт. (<i>duompr.</i>)
BAUSCH + LOMB /США/	SofLens Natural Colors фиолет., сер., гол., син., бирюзово-зел., св-зел., зел., тем-зел., орех., темно-орех.	дневной; замена через 1 мес.	Полимакон, 38,6%, FDA 1	14,0	8,7	0,00 ÷ -6,00 (шаг 0,5D)	0,06	8,5 (14,2)	Блистер 2 шт.
BESCON /КОРЕЯ/	Tutti ONE-DAY гол., зел., карий, сер.	дневной; замена через 1 день	Окуфилкон А, 38%, FDA 4	14,2	8,7	0,0 ÷ -6,0 (шаг 0,5D) <i>plano</i>	0,08	14,6 (18,5)	Блистер 8 и 15 шт.
	Tutti Premium/Classic гол., зел., аква, карий, сер., фиолет.	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	0,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,06	11 (18,5)	Блистер 2 шт. (контейнер)
DREAMCON /КОРЕЯ/	HERA color 9 линеек по цветам (всего 52 рис.)	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-1,00 ÷ -8,00 (шаг 0,5D) <i>plano</i>	0,07	9,0	Блистер 2 шт.
	HERA Gold Shine, Asia, Diamond и др.	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-1,00 ÷ -6,00 (шаг 0,5D) <i>plano</i>	0,07	9,0	Блистер 2 шт.
	HERA Black King, Sun, Stone и др.	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-1,00 ÷ -6,00 (шаг 0,5D) <i>plano</i>	0,07	9,0	Блистер 2 шт.
	HERA Carnival White Eye, Red Eye и др. HERA Ultraviolet Red, Pink, Lemon и др.	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-1,00 ÷ -15,0 +1,0 ÷ +10,0 (шаг 0,5 D)	0,08	- (18,5)	Блистер 2 шт.
EYEMED TECHNOLOGIES /ИТАЛИЯ/	Adore 2-х тон.: зел., гол. и др. 3-х тон.: зел., св-зел. и др. Adore Dare сер., зел. и др.	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-1,0 ÷ -15,0 +1,0 ÷ +10,0 (шаг 0,5 D)	0,08	- (18,5)	Блистер 2 шт.
G&G /КОРЕЯ/	Eye Free Colors большой выбор рисунков	дневной; замена через 3 мес.	НEMA- сополимер, 42%	14,0 14,5	8,6	-0,50 ÷ -6,0 (шаг 0,5D) <i>plano</i>	0,08	- (35)	Блистер 2 шт.
GELFLEX /АВСТРАЛИЯ/	Ningaloo 2-х и 3-х тон.: сер.-гол., летний орешник, жемчужный сер. и др. УФ-защита, асферич. дизайн	дневной; замена через 1 мес.	Метафилкон А, 55%, FDA 4	14,3	8,6	-1,0 ÷ -8,0 (шаг 0,5 D) -8,0 ÷ -10,0 (шаг 1,0D) <i>plano</i>	-	- (31,6)	Блистер 2 шт.
	Sofclear COLOURS 2-х тоновые: дымчатый сер., шоколадная карамель и др.	дневной; замена через 3 мес.	PolyNema, 43%, FDA 1	14,2	8,6	-1,0 ÷ -8,0 (шаг 0,5D) -8,0 ÷ -10,0 (шаг 1,0D) <i>plano</i>	-	- (24,5)	Блистер 2 шт.

*) Названия основных цветов даны сокращенно

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза (цвета*)	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
GELFLEX /АВСТРАЛИЯ/	Sofclear Enhance with Biomoist <i>оттеночные тонированные:</i> голубой, зеленый, аква УФ-защита, асферич. дизайн	дневной; замена через 1 день	Метафилкон А, 55%, FDA 4 <i>увлажняющая добавка Biomoist</i>	14,3	8,6	-1,0 ÷ -8,0 (шаг 0,5 D)	0,06	- (31,6)	Блистер 2 шт.
HORIEN /ТАЙВАНЬ/	Wincolor <i>2-х и 3-х тоновые:</i> сер., корич., зел., фиолет., гол.	дневной; замена через 1 мес.	Окуфилкон D, 58%, FDA 4	14,0	8,6	-1,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -9,0 (шаг 0,5D) <i>plano</i>	0,10 <i>(2-х тон.)</i> 0,11 <i>(3-х тон.)</i>	24	Блистер 2 шт.
INNOVA VISION /ТАЙВАНЬ/	ColorNova <i>типы окраски:</i> многоцветный, Azalea, Magic, Disco, Big Eye	дневной; замена через 1 мес.	НЕМА- сополимер, 60%	14,00	8,6	0,00 ÷ -9,00 (шаг 0,25D)	-	-	Блистер 2 шт.
	ColorNova 1-day гол., зел., сер., орех., фиолет.	дневной; замена через 1 день	НЕМА- сополимер, 60%	14,00	8,6	<i>plano</i>	-	-	Блистер 8 шт.
INTEROJO /КОРЕЯ/	Adria Color асфер. перед. поверхность <i>1 тон:</i> сер., корич., гол., зел., лаванда <i>2 тон:</i> сер., корич., сапфир, зел. и др. <i>3 тон:</i> сер., корич. и др.	дневной; замена через 3 мес	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0 <i>(однотон.)</i> 14,2 <i>(2-х и 3-х тон.)</i>	8,6	0,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,07	9 (19)	Блистер 2 шт.
	Adria Crazy асфер. перед. поверхность 39 вариантов (S и др.)	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	<i>plano</i>	0,07	9 (19)	Флакон
	Adria Elegant асфер. перед. поверхность сер., корич., гол., зел.	дневной; замена через 3 мес.	Метафилкон А, 55%, FDA 4	14,2	8,6	0,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,07	17 (21,2)	Блистер 2 шт.
	Adria Glamorous асфер. перед. поверхность сер., корич., гол. и др.	дневной; замена через 3 мес.	НЕМА- сополимер, 43%, FDA 1	14,5	8,6	0,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,07	17,3 (22)	Блистер 2 шт.
	Adria Neon асфер. перед. поверхность <i>6 светящихся в темноте под действием УФ-лучей цветов</i>	дневной; замена через 3 мес	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	0,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,07	9 (19)	Блистер 2 шт.
MAXLOOK /КОРЕЯ/	Amore Bi-Tone <i>2-х тоновые:</i> зел., гол., желт., медовый Amore Tri-Tone <i>3-х тоновые:</i> зел., св.-зел., гол., св.-гол. Amore Dare-Tone сер., зел., желт., гол. IQ Lens Amore <i>1 и 2-х тоновые</i>	дневной; замена через 3 мес.	Ефилкон, 43%, УФ-защита	14,0	8,6	0,0 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (32,5)	Блистер 2 шт.
MI GWANG /КОРЕЯ/	Офтальмикс Colors <i>12 цветов</i>	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,2	8,6	<i>plano</i> , -1,0 ÷ -8,50 (шаг 0,5D)	0,07	- (23,47)	Блистер 2 шт.
	Офтальмикс Colors Galaxy <i>5 оригинальных цветов</i>	дневной; замена через 3 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,2	8,6	<i>plano</i>	0,07	- (23,47)	Блистер 2 шт.
NEOVISION /КОРЕЯ/	Neo Cosmo <i>5 основных цветов и более 57 цветовых комбинаций (1-, 2-, 3- и 4-х цветные рисунки, Glazy)</i>	дневной; замена через 1-3 мес.	2-HEMA, 45%, FDA 1	14,2	8,6	0,0 ÷ -8,0 (шаг 0,5D)	-	-	Блистер 2 шт.
NEW BIO /КОРЕЯ/	OKVision Fusion <i>декоративные:</i> бельмо, смайлик, и др.	дневной; замена через 3 мес.	Terpolimer, 45%, FDA 2	14,0	8,6	<i>plano</i>	0,06	16,5 (27,5)	Блистер 2 шт.
	OKVision Infiniti <i>оттеночные линзы для светлых глаз:</i> гол., зел., аква	дневной; замена через 6 мес.	Terpolimer, 55 %, FDA 2	14,0	8,4; 8,7	±0,50 ÷ ±6,00 (шаг 0,25D) ±6,5 ÷ ±20,0 (шаг 0,5D)	0,06	19,5 (32,5)	Флакон

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЦВЕТНЫЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза (цвета*)	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
OKVISIONE /ИТАЛИЯ/	OKVision Fusion <i>2-х тоновые, смешанные</i>	дневной; замена через 3 мес.	Terpolimer, 45%, FDA 2	14,0	8,6	0,0 ÷ -15,0 (шаг 0,5D)	0,06	16,5 (27,5)	Блистер 2 шт.
	OKVision Fusion Fancy декоративные					<i>plano</i>			
	OKVision Fusion Nuance <i>оттеночные линзы: гол., эл., аква</i>	дневной; замена через 2 недели	Terpolimer, 45%, FDA 2	14,0	8,6	0,0 ÷ -15,0 (шаг 0,5D)	0,06	16,5 (27,5)	Блистер 2 шт.
POLYTOUCH CONTACTLENS /КОРЕЯ/	Офтальмикс Баттерфляй One Day <i>2-х тоновые</i>	дневной; замена через 1 день	Poly-HEMA, 58%, FDA 2	14,2	8,6	<i>plano</i> , -1,0 ÷ -10,0 (шаг 0,5D)	0,06	- (25)	Блистер 2 шт.
	Офтальмикс Баттерфляй One Month <i>3-х тоновые</i>	дневной; замена через 1 мес.	Poly-HEMA, 58%, FDA 2	14,2	8,6	<i>plano</i> , -1,0 ÷ -6,0 (шаг 0,5D)	0,07	- (25)	Блистер 2 шт.
	Офтальмикс Баттерфляй 1Т <i>10 цветов</i>	дневной; замена через 3 мес.	Poly-HEMA, 42%, FDA 1	14,2	8,6	<i>plano</i> , -1,0 ÷ -6,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (19,5)	Блистер 2 шт.
	Офтальмикс Баттерфляй 3Т <i>8 цветов</i>	дневной; замена через 3 мес.	Poly-HEMA, 42%, FDA 1	14,2	8,6	<i>plano</i> , -1,0 ÷ -7,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (19,5)	Блистер 2 шт.
	Офтальмикс Баттерфляй Gold <i>3 сияющих цвета</i>	дневной; замена через 3 мес.	Poly-HEMA, 42%, FDA 1	14,2	8,6	<i>plano</i> , -1,0 ÷ -6,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (19,5)	Блистер 2 шт.
	Офтальмикс Баттерфляй Crazy <i>11 рисунков</i>	дневной; замена через 3 мес.	Poly-HEMA, 42%, FDA 1	14,2	8,6	<i>plano</i>	0,08	- (19,5)	Блистер 2 шт.

ТРАДИЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Dk (Dk/t)	Упаковка
BESCON /КОРЕЯ/	NewGen 38 тонированы	дневной; замена через 6-12 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -15,0 +1,0 ÷ +10,0 (шаг 0,5D)	0,065	10 (15,5)	Флакон
GELFLEX /АВСТРАЛИЯ/	Sea Clear Vial тонированы	дневной; замена через 6 мес.	Poly-HEMA, 43%, FDA 1	14,2	8,6	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,5 ÷ -10,0 +1,0 ÷ +6,00 (шаг 0,5D) -10,0 ÷ -20,0 (шаг 1,0D)	0,06	- (23,8)	Флакон
INTEROJO /КОРЕЯ/	Morning-Q38 тонированы	дневной; замена через 6-9 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) ±6,5 ÷ ±20,0 (шаг 0,5D)	0,08	12 (17)	Флакон
	Morning-Q55 тонированы	дневной; замена через 6-9 мес.	Хайоксифилкон А, 55%, FDA 2	14,2	8,6	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -20,0 +6,5 ÷ +12,0 (шаг 0,5D)	0,08	25 (24)	Флакон
NEW BIO /КОРЕЯ/	OKVision Infiniti тонированы	дневной; замена через 6 мес.	Terpolimer, 55%, FDA 2	14,0	8,4; 8,7	±0,50 ÷ ±6,00 (шаг 0,25D) ±6,5 ÷ ±20,0 (шаг 0,5D)	0,06	19,5 (32,5)	Флакон
PEGAVISION /ТАЙВАНЬ/	Aquamax 38 тонированы, УФ-защита	дневной; замена через 6 мес.	Полимакон, 38%, FDA 1	14,0	8,6	-0,5 ÷ -6,0 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -12,0 +1,0 ÷ +4,0 (шаг 0,5D)	0,08	- (15)	Флакон

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Оптическая зона (мм)	Dk (Dk/t)	Упаковка
Фирма КОНКОР /Вологда/	КОНКОР BENZ 38% High Blue Tint голубой оттенок	дневной; замена через 8-10 мес.	BENZ 38% High Blue Tint, 38%, FDA 1	14,3 по инд. заказу 11,0 ÷ 15,0	8,2; 8,4; 8,6 по инд. заказу от 7,2 до 9,6 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D) по инд. заказу до +/- 30,0	0,08	8,0	9,6 (12)	Флакон
	КОНКОР BENZ UV 38% High Blue Tint голубой оттенок (УФ-защита)	дневной; замена через 8-10 мес.	BENZ UV 38% High Blue Tint, 38%, FDA 1	14,3 по инд. заказу 11,0 ÷ 15,0	8,2; 8,4; 8,6 по инд. заказу 7,2 ÷ 9,6 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D) по инд. заказу до +/- 30,0	0,08	8,0	9,6 (12)	Флакон
	КОНКОР Contaflex 38 Clear бесцветные	дневной; замена через 8-10 мес.	Contaflex 38 Clear, 38%, FDA 1	14,3 по инд. заказу 11,0 ÷ 15,0	8,2; 8,4; 8,6 по инд. заказу 7,2 ÷ 9,6 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D) по инд. заказу до +/- 30,0	0,08	8,0	7,9	Флакон
	КОНКОР BENZ 56% MF High Blue Tint голубой оттенок	дневной; замена через 6-8 мес.	BENZ 56% MF High Blue Tint, 56%, FDA 2	14,3 по инд. заказу 11,0 ÷ 15,0	8, 2; 8,4; 8,6 по инд. заказу 7,2 ÷ 9,6 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D) по инд. заказу до +/- 30,0	0,1	8,0	17 (17)	Флакон
	КОНКОР Contaflex 67 UV Clear бесцветные (УФ-защита)	дневной; замена через 6 мес.	Contaflex 67 UV Clear, 67%, FDA 2	14,3 по инд. заказу 11,0 ÷ 15,0	8,2; 8,4; 8,6 по инд. заказу 7,2 ÷ 9,6 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D) по инд. заказу до +/- 30,0	0,1	8,0	30 (30)	Флакон
	КОНКОР Definitive 74% Clear (Si-H) бесцветные	дневной; замена через 3 мес.	Definitive 74, 74%, силикон-гидрогель	14,3 по инд. заказу 11,0 ÷ 15,0	8,2; 8,4; 8,6 по инд. заказу 7,2 ÷ 9,6 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D) по инд. заказу до +/- 30,0	0,1	8,0	60 (60)	Флакон
<i>ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ КОНКОР</i>										
КОНКОР торические	дневной; замена через 6-8 мес.	BENZ 56% MF High Blue Tint, 56%, FDA 2	14,5	от 7,8 до 9,2 (шаг 0,2)	Сфера: +6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+30,0 (шаг 0,5D) Метод стабилизации: призматич. балласт, перибалласт	0,15	-	17 (-)	Флакон	
		Definitive 74, 74%, силикон-гидрогель						60		
	дневной; замена через 3 мес.	BENZ 56% MF High Blue Tint, 56%, FDA 2	15,0	от 7,6 до 8,2 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+30,0 (шаг 0,5D)	0,5	17 (-)	Флакон		
		Definitive 74, 74%, силикон-гидрогель							60	
КОНКОР для коррекции кератоконуса	дневной; замена через 6-8 мес.	BENZ 56% MF High Blue Tint, 56%, FDA 2	от 13,0 до 15,0	от 7,6 до 9,2 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D)	0,08	8,0	9,6 (12)	Флакон	
		BENZ 38% High Blue Tint, 38%, FDA 1						7,9		
КОНКОР оттеночные, радужные, радужные Color, косметические	дневной; замена через 6 мес.	BENZ 38% High Blue Tint, 38%, FDA 1	от 13,0 до 15,0	от 7,6 до 9,2 (шаг 0,2)	+6,00 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -/+6,0 ÷ -/+20,0 (шаг 0,5D)	0,08	8,0	9,6 (12)	Флакон	
		Contaflex 38 Clear, 38%, FDA 1						7,9		

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЛИНЗЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Производитель	Линза	Режим ношения, срок замены	Материал, %H ₂ O, группа FDA	Диаметр (мм)	Базовая кривизна (мм)	Оптическая сила (D)	t, мм (-3,00D)	Оптическая зона (мм)	Dk (Dk/t)	Упаковка	
ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	<i>ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ OKVision</i>										
	OKVision OKV-SL индивидуальная сферическая	Дневной, замена через 6 месяцев	Contaflex GM Advance 49%; Contaflex GM Advance 58%; Definitive 74 (силикон-гидрогель 74%)	13,5 ÷ 16,0 (шаг 0,1)	7,0 ÷ 9,0 (шаг 0,05)	Сфера: +30,0 ÷ -30,0 (шаг 0,25D)	0,18	-	16 26 60	Флакон	
	OKVision OKV-SL индивидуальная торическая	Дневной, замена через 6 месяцев	Contaflex GM Advance 49%; Contaflex GM Advance 58%; Definitive 74 (силикон-гидрогель 74%)	13,5 ÷ 15,0	6,5 ÷ 9,0 (шаг 0,05)	Сфера: +30,0 ÷ -30,0 (шаг 0,25D) Цилиндр: 0 ÷ -15,0 (шаг 0,25D) Оси: от 0° до 180° (шаг 1°)	0,19	-	16 26 60	Флакон	
	OKVision OKV-SL индивидуальная мультифокальная	Дневной, замена через 6 месяцев	Contaflex GM Advance 49%; Contaflex GM Advance 58%; Definitive 74 (силикон-гидрогель 74%)	14,0	8,4; 8,6	+10,0 ÷ -20,0 (шаг 0,25D) Add: до +3,5 D	0,18	-	16 26 60	Флакон	
	OKVision Defocus Control индивидуальная бифокальная	Дневной, замена через 6 месяцев	Contaflex GM Advance 49%; Contaflex GM Advance 58%; Definitive 74 (силикон-гидрогель 74%)	14,0	8,4; 8,6	0,0 ÷ -10,0 (шаг 0,25D) Add: до +3,5 D	0,18	-	16 26 60	Флакон	
	OKVision OKV-SL SofK индивидуальная для коррекции кератоконуса	Дневной, замена через 6 месяцев	Contaflex GM Advance 49%; Contaflex GM Advance 58%; Definitive 74 (силикон-гидрогель 74%)	14,2; 14,8	7,0 ÷ 8,2 (шаг 0,3)	Сфера: +30,0 ÷ -30,0 (шаг 0,1D) Цилиндр: 0 ÷ -10,0 (шаг 0,25D)	0,48	-	16 26 60	Флакон	
OKVision OKV-SL EyeBrid индивидуальная гибридная линза	Дневной, замена через 6 месяцев	Центр: GP Contamac Optimum Extra Dk 100; Периферия: Contamac Definitive 50 (CF 50%)	14,9 (опция 15,5) D _{жкл} 8,5 (опция 10,0)	5,5 ÷ 10,0 (шаг 0,3)	Сфера: +20,0 ÷ -20,0 (шаг 0,25D) Цилиндр: 0 ÷ -10,0 (шаг 0,25D)	0,20	-	100	Флакон		
ОПТИМЕДСЕРВИС /Уфа/	Optimed	дневной; замена через 6 мес.	BENZ-38, 38%, FDA1	14,5	8,3 ÷ 8,8	-0,50 ÷ -6,00 (шаг 0,25D) -6,0 ÷ -9,0 (шаг 0,5D)	0,07	11,0	9,5 (16)	Флакон	

СПИСОК ЛИНЗ ПО ФИРМАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ /ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ/

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЛИНЗЫ	ТИП ЛИНЗ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЛИНЗЫ	ТИП ЛИНЗ	
ALCON /США/	AIR OPTIX AQUA	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	COOPERVISION /США/	Maxima 38 FW	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	AIR OPTIX AQUA Multifocal	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ		Maxima 55 Comfort +	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	AIR OPTIX for Astigmatism	ТОРИЧЕСКИЕ		Maxima 55 UV Aspheric	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	AIR OPTIX Colors	ЦВЕТНЫЕ		Maxima Si Hy	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	AIR OPTIX Night&Day AQUA	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ		Maxima Si Hy Plus	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	AIR OPTIX PLUS HYDRAGLYDE	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ		Офтальмикс ONE DAY	ОДНОДНЕВНЫЕ	
	Dailies Aqua Comfort Plus	ОДНОДНЕВНЫЕ		Офтальмикс Profi	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	Dailies Aqua Comfort Toric	ТОРИЧЕСК./ОДНОДНЕВНЫЕ		Hera	ЦВЕТНЫЕ	
	Dailies Total 1	ОДНОДНЕВНЫЕ		Adore	ЦВЕТНЫЕ	
	Dailies Total 1 Multifocal	МУЛЬТИФОК./ ОДНОДНЕВНЫЕ		G&G /КОРЕЯ/	Eye Free Colors	ЦВЕТНЫЕ
	FreshLook Colors	ЦВЕТНЫЕ		GELFLEX /АВСТРАЛИЯ/	Ningaloo	ЦВЕТНЫЕ
	FreshLook ColorBlends	ЦВЕТНЫЕ		Sea Clear, Sea Clear Plus	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	FreshLook Dimensions	ЦВЕТНЫЕ		Sea Clear Vial	ТРАДИЦИОННЫЕ	
	BAUSCH + LOMB /США/	Bausch+Lomb Ultra		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Sofclear, Sofclear Plus	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
		Biotrue ONE Day		ОДНОДНЕВНЫЕ	Sofclear COLOURS	ЦВЕТНЫЕ
		Optima FW		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Sofclear Comfort with BioMoist	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
		PureVision		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Sofclear Comfort 1 day with BioMoist	ОДНОДНЕВНЫЕ
PureVision 2 HD		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Sofclear Enhance BioMoist	ЦВЕТНЫЕ/ОДНОДНЕВН.		
PureVision 2 HD for Astigmatism		ТОРИЧЕСКИЕ	Sofclear One day	ОДНОДНЕВНЫЕ		
PureVision Multi-Focal		МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ	HORIEN /ТАЙВАНЬ/	Diamond 55	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
SofLens 59		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ		Horien 1 Day	ОДНОДНЕВНЫЕ	
SofLens Daily Disposable		ОДНОДНЕВНЫЕ		Wincolor	ЦВЕТНЫЕ	
SofLens Natural Colors		ЦВЕТНЫЕ	HYDROGEL VIS./США/	Extreme H ₂ 0 54	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
SofLens Toric		ТОРИЧЕСКИЕ		ColorNova	ЦВЕТНЫЕ	
BESCON /КОРЕЯ/		NewGen 38	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	ColorNova 1-day	ЦВЕТНЫЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ	
		NewGen 38	ТРАДИЦИОННЫЕ	INTEROJO /КОРЕЯ/	Adria Color (Elegant, Neon...)	ЦВЕТНЫЕ
	NewGen 55	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Adria O ₂ O ₂		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	Tutti	ЦВЕТНЫЕ	Adria Go		ОДНОДНЕВНЫЕ	
	Tutti One-Day	ЦВЕТНЫЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ	Adria Season		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
CLEARLAB /СИНГАПУР/	Clear 1-day	ОДНОДНЕВНЫЕ	Adria Sport		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
	Clear 1-day toric	ТОРИЧЕСКИЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ	Morning Q38	ТРАДИЦИОННЫЕ		
	Clear 55 A	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Morning Q55	ТРАДИЦИОННЫЕ		
	Clear 58 UV	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	OKVision Fusion New	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ		
	Clear all-day	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	OKVision Prima Bio bi-focal	БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ		
	Clearday BEYOND	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	JOHNSON & JOHNSON /США/	1-Day Acuvue Moist	ОДНОДНЕВНЫЕ	
	Clearday BEYOND toric	ТОРИЧЕСКИЕ		1-Day Acuvue Moist for Astigmatism	ТОРИЧЕСКИЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ	
	Clearday BEYOND 1-day	ОДНОДНЕВНЫЕ		1-Day Acuvue Moist Multifocal	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ	
	Clearday BEYOND 1-day toric	ТОРИЧЕСКИЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ		1-Day Acuvue TruEye	ОДНОДНЕВНЫЕ	
	Clearday BEYOND 1-day multifocal	МУЛЬТИФОК./ ОДНОДНЕВНЫЕ		Acuvue Oasys 1-Day	ОДНОДНЕВНЫЕ	
	COOPERVISION /США/	Avaira	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Acuvue Oasys 1-Day for Astigmatism	ТОРИЧЕСКИЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ	
Avaira Vitality		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	Acuvue Oasys for Astigmatism	ТОРИЧЕСКИЕ		
Avaira Vitality toric		ТОРИЧЕСКИЕ	Acuvue Oasys with HydraClear Plus	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ		
Biofinity		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	KONTAKT LENS /ИТАЛИЯ/	OKVision Prima Bio Toric	ТОРИЧЕСКИЕ	
Biofinity multifocal		МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ		MAXLOOK /КОРЕЯ/	Amore	ЦВЕТНЫЕ
Biofinity toric		ТОРИЧЕСКИЕ			IQ Lens Amore	ЦВЕТНЫЕ
Biofinity XR		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	MENICON /ЯПОНИЯ/	Menisoft	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
Biofinity XR toric		ТОРИЧЕСКИЕ		Miru 1 day Menicon Flat Pack	ОДНОДНЕВНЫЕ	
Biomedics 55 Evolution aspher.		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ		Miru 1 month Menicon	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ	
clariti 1 day		ОДНОДНЕВНЫЕ		Miru 1 month Menicon for Astigmatism	ТОРИЧЕСКИЕ	
clariti 1 day multifocal		МУЛЬТИФОК./ ОДНОДНЕВНЫЕ		Miru 1 month Menicon Multifocals	МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ	
clariti 1 day toric		ТОРИЧЕСКИЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ	MI GWANG /КОРЕЯ/	Офтальмикс Colors	ЦВЕТНЫЕ	
clariti elite		ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ		Офтальмикс Colors Galaxy	ЦВЕТНЫЕ	
MyDay daily disposable		ОДНОДНЕВНЫЕ				
Proclear 1 day		ОДНОДНЕВНЫЕ				
Proclear	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ					
Maxima 1-Day Premium	ОДНОДНЕВНЫЕ					

*) Красным цветом выделены силикон-гидрогелевые линзы

СПИСОК ЛИНЗ ПО ФИРМАМ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ /ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ/

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЛИНЗЫ	ТИП ЛИНЗ
MPG&E /ГЕРМАНИЯ/	VizoTeque Comfortex	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	VizoTeque Comfortex 1-Day	ОДНОДНЕВНЫЕ
	VizoTeque Supreme	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	VizoTeque Vero One	ОДНОДНЕВНЫЕ
NEOVISION /КОРЕЯ/	Neo Cosmo	ЦВЕТНЫЕ
	New Green	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
NEW BIO /КОРЕЯ/	OKVision Infiniti	ТРАДИЦИОННЫЕ/ЦВЕТНЫЕ
OKVISIONE /ИТАЛИЯ/	OKVision Fusion	ЦВЕТНЫЕ
	OKVision Fusion Nuance	ЦВЕТНЫЕ
	OKVision OneTouch 1 Day	ОДНОДНЕВНЫЕ
	OKVision Premium SH-48	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	OKVision Prima	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	OKVision Prima Bio	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	OKVision Season	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
PEGAVISION /ТАЙВАНЬ/	Aquamax	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	Aquamax 1-Day	ОДНОДНЕВНЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЛИНЗЫ	ТИП ЛИНЗ
PEGAVISION /ТАЙВ./	Aquamax 38	ТРАДИЦ./ПЛАН.ЗАМЕНЫ
POLYTOUCH CONT. /КОРЕЯ/	Офтальмикс Баттерфляй Clear	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	Офтальмикс Баттерфляй One Day	ЦВЕТНЫЕ / ОДНОДНЕВНЫЕ
	Офтальмикс Баттерфляй One Month	ЦВЕТНЫЕ
	Офтальмикс Баттерфляй	ЦВЕТНЫЕ
UNICON OPTICAL /ТАЙВАНЬ/	IQ Lens Oxygen 1-day	ОДНОДНЕВНЫЕ
	IQ Lens Oxygen Monthly	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
WOENLK /ГЕРМАНИЯ/	Zeiss Contact Day 1	ОДНОДНЕВНЫЕ
	Zeiss Contact Day 1 toric	ТОРИЧ./ОДНОДНЕВНЫЕ
	Zeiss Contact Day 1 multifocal	МУЛЬТИФОК./ОДНОДНЕВНЫЕ
	Zeiss Contact Day 30 Air	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	Zeiss Contact Day 30 Air toric	ТОРИЧЕСКИЕ
	Zeiss Contact Day 30 compatic	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	Zeiss Contact Day 30 compatic toric	ТОРИЧЕСКИЕ

*) Красным цветом выделены силикон-гидрогелевые линзы

КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЛИНЗЫ	ТИП ЛИНЗ
Фирма КОНКОР /Вологда/	КОНКОР Benz 38%	ТРАДИЦИОННЫЕ
	КОНКОР Benz UV38%	ТРАДИЦИОННЫЕ
	КОНКОР Benz 56% MF	ТРАДИЦИОННЫЕ
	КОНКОР Contaflex 38	ТРАДИЦИОННЫЕ
	КОНКОР Contaflex 67 UV	ТРАДИЦИОННЫЕ
	КОНКОР Definitive 74%	ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ
	КОНКОР окрашенные	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
	КОНКОР торические	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гидрогелевые и СГ)
	КОНКОР для коррекции кератоконуса	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гидрогелевые и СГ)
ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	OKVision OKV-SL сферические	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гидрогелевые и СГ)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	ЛИНЗЫ	ТИП ЛИНЗ
ОКЕЙ ВИЖЕН РИТЕЙЛ /Москва/	OKVision OKV-SL торические	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гидрогелевые и СГ)
	OKVision OKV-SL бифокальные линзы	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гидрогелевые и СГ)
	OKVision OKV-SL EyeBrid	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ гибридные (СГ+ЖП)
	OKVision OKV-SL SoftK для коррекции кератоконуса	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гидрогелевые и СГ)
	OKVision Defocus Control бифокальные линзы	ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (гидрогелевые и СГ)
	ОПТИМЕДСЕРВИС /Уфа/	Optimed

BAUSCH+LOMB

Biotrue® ONEday*

Единственные
контактные линзы
с влагосодержанием
как у наших глаз**



Медицинское изделие, Рег. Уд. № ФСЗ 2012/12952 от 31.12.15 г.

Линзы контактные мягкие
однодневные для коррекции зрения
Bausch+Lomb® Biotrue ONEday (nesofilcon a)

* ONEday (англ.яз.) — однодневные (русс.яз.)

** Среди мягких контактных лиц, зарегистрированных в России по данным «Контактные линзы. Справочные таблицы». Приложение к №7 журнала «Вестник оптометрии», 2018. Только несофилкон А, материал Biotrue® ONEday имеет влагосодержание 78%.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ