

# Больше чем просто очистление



НОВИНКА

BAUSCH+LOMB

**ReNu**

**ADVANCED**

раствор универсальный по уходу  
за мягкими контактными линзами

УЛУЧШЕННАЯ ОЧИСТКА

СИСТЕМА  
тройной  
дезинфекции

уничтожает 99,9%  
микробов\*

комфорт  
в течение  
всего дня

Раствор предназначен для  
очистки, удаления белковых  
отложений, дезинфекции,  
облагораживания и хранения всех  
видов мягких контактных линз,  
включая линзы из  
сильно гидрофильные

360 мл

Контейнер для линз в комплекте

ВСТУПАЙТЕ  
В ОНЛАЙН-АКАДЕМИЮ  
BAUSCH+LOMB!



BAUSCH+LOMB



Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г. Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ  
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

# Многофункциональный усиленный раствор ReNu® Advanced



Сочетание трех дезинфектантов и двух поверхностно-активных веществ обеспечивает качественную дезинфекцию и очистку линз, а также способствует комфорту при ношении контактных линз в течение всего дня<sup>1,2,3,4</sup>.



## Тройная система дезинфекции

Единственный раствор с тремя дезинфицирующими компонентами<sup>2</sup>. Уничтожает более 99,9% патогенных микроорганизмов<sup>3</sup>.



## Усиленное очищение

Два поверхностно-активных вещества разрыхляют, мягко очищают и удаляют скопления механических загрязнений и отложений с мягких контактных линз<sup>1</sup>.



## Способствует комфорту на весь день


Увлажняющий компонент в составе способствует комфортному ношению контактных линз в течение 20 часов<sup>4,5</sup>.

**BAUSCH + LOMB** **170** ЛЕТ

Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г. Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

## Усиленное очищение

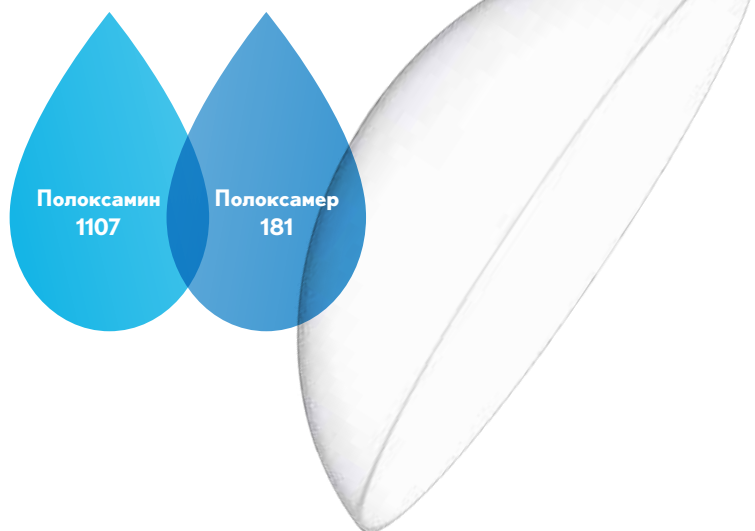

Разрыхляет скопления механических загрязнений и отложений



Растворяет белковые отложения



Помогает предотвратить образование налёта, вызывающего раздражение, на поверхности линз



Бережно очищает и удаляет загрязнения

## Способствует комфорту на весь день



Полоксамер 181 в составе способствует комфортному ношению контактных линз в течение 20 часов<sup>4,5</sup>.





# Тройная система дезинфекции


Полиаминопропил бигуанид 0,00005 %

Поликватерниум 0,00015 %

Алексидин 0,0002 %

Дезинфекция широкого спектра действия против стандартного набора микроорганизмов ГОСТ Р ИСО / ISO и ряда штаммов, выделенных в клинических условиях

Превосходит требования стандартов ГОСТ Р ИСО / ISO в отношении эффективности дезинфекции

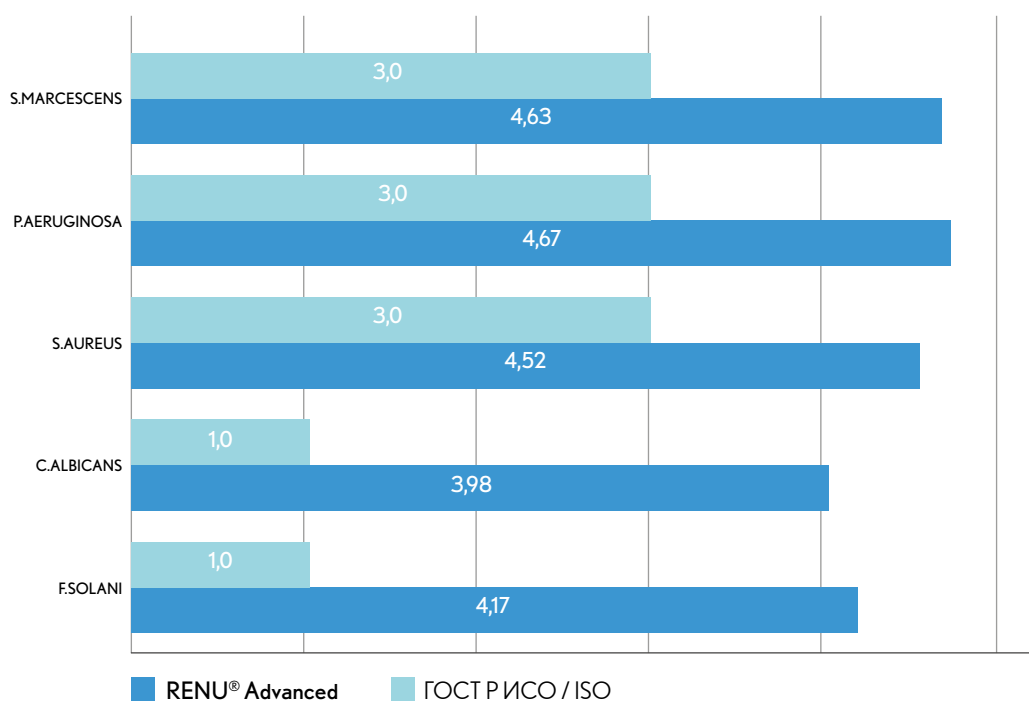

Уничтожает более  
**99,9%**  
патогенных микроорганизмов<sup>3</sup>

Среднее логарифмическое снижение (количество уничтоженных микроорганизмов)

Эффективность дезинфекции в отношении штаммов клинических изолятов, включая:

Staphylococcus aureus (MRSA) | Pseudomonas aeruginosa | Staphylococcus epidermidis (MRSE) | Candida albicans | Fusarium solani | A. xylosoxidans | D. acidovororans | S. maltophilia | Serratia marcescens | Aspergillus fumigatus | Fusarium oxysporum

ReNu® Advanced единственный раствор с тройной системой дезинфекции<sup>2</sup>.



Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г.  
Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами.


ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ



# Тройная система дезинфекции

Дезинфекция при более низкой концентрации действующих веществ


Эффективность дезинфекции

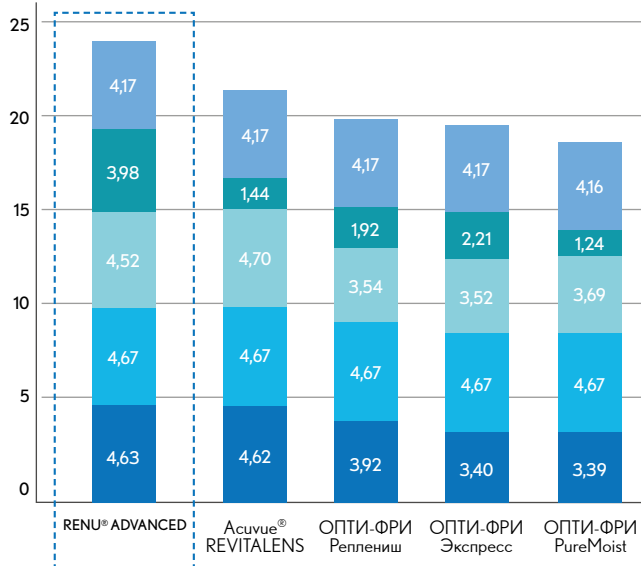

- S. MARCESCENS
- P. AERUGINOSA
- S. AUREUS
- C. ALBICANS
- F. SOLANI

Среднее логарифмическое снижение  
(количество уничтоженных микроорганизмов)

Концентрация дезинфицирующих веществ

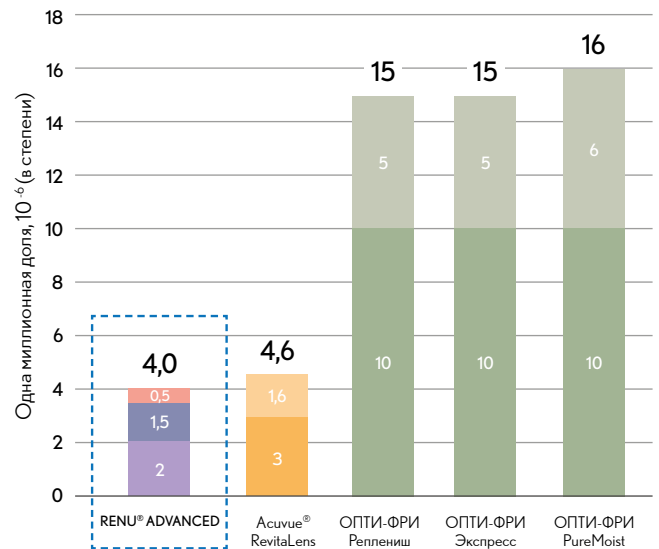

**RENU® Advanced**

- Алесидина дигидрохлорид
- Поликватерниум
- Полиаминпропил бигуанид

**Acuvue® RevitaLens**

- Поликватерниум-1
- Алесидин

**ОПТИ-ФРИ Реплениш**

- Поликвад
- Алдокс

**ОПТИ-ФРИ Экспресс**

- Поликвад
- Алдокс

**ОПТИ-ФРИ PureMoist**

- Поликвад
- Алдокс

## Подтвержденная биосовместимость

	Степень 0 (отсутствие)	Степень 1 (незначительное количество)	Степень 2 (легкая)	Степень 3 (средняя)	Степень 4 (тяжелая)
Инфильтраты роговицы	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Эпителиальный отек	99,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%
Микрокисты эпителия	99,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Неоваскуляризация роговицы	98,2%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%
Лимбальная инъекция	94,6%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%
Бульбарная инъекция	90,9%	9,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Прокрашивание роговицы	79,2%	20,2%	0,7%	0,0%	0,0%
Поражение хряща и конъюнктивы верхнего века	72,3%	26,4%	1,2%	0,1%	0,0%

# Многофункциональные растворы ReNu®

Чистота Ваших линз –  
комфорт для Ваших глаз!



ReNu® MultiPlus



**Чистый взгляд каждый день.**

Очищает, разрыхляет и удаляет скопления белковых и других отложений и загрязнений с мягких контактных линз<sup>6</sup>.



**Уничтожает патогенные микроорганизмы на поверхности линз<sup>6</sup>.**

С заботой о Ваших  
чувствительных глазах!



ReNu® MPS



**Мягкая формула для чувствительных глаз.**

Разработан для чувствительных глаз, содержит сниженную концентрацию консервантов<sup>7,8</sup>.




**Дезинфицирует, очищает, увлажняет мягкие контактные линзы.**

Больше чем просто  
очистление



ReNu® ADVANCED

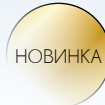

**Тройная система дезинфекции**

Единственный раствор с тремя дезинфектантами<sup>2</sup>. Уничтожает более 99,9% патогенных микроорганизмов<sup>3</sup>.



**Усиленное очищение**

Два поверхностно-активных вещества разрыхляют, мягко очищают и удаляют скопления механических загрязнений и отложений с мягких контактных линз.<sup>1,9</sup>



**Способствует комфорту на весь день**

Увлажняющий компонент в составе способствует комфортному ношению контактных линз в течение 20 часов.<sup>4,5</sup>

1. Инструкция по применению раствора универсального ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами. 2. ReNu® Advanced имеет в своём составе три дезинфицирующих компонента по сравнению с другими растворами по данным «Средства ухода за контактными линзами. Каталог 2022». Специальное приложение к журналу «Вестник оптометрии». 3. Материалы внутренних исследований компании Bausch + Lomb, 2017. Результаты независимого тестирования универсального раствора ReNu® Advanced против 5 видов организмов для дезинфицирующих средств. Исследование основано на стандарте ГОСТ Р ИСО 14729-2010 / ISO 14729:2001 в отношении (P. aeruginosa, S. aureus, S. marcescens, C. albicans, F. solani). 4. Материалы внутренних исследований компании Bausch + Lomb, 2018. Результаты использования в домашних условиях многофункционального раствора ReNu® Advanced. 5. Материалы внутренних исследований Bausch + Lomb, 2016. Высокорастворяющий сверхточный масс-селективный ионный мониторинг/масс-спектрометрия (HRAMSIMLC/MS) Определение уровня увлажняющего компонента полоксамера 181 в линзах после использования многофункционального раствора ReNu® Advanced. 6. Инструкция по применению раствора универсального ReNu® MultiPlus. 7. Инструкция по применению раствора универсального ReNu® MPS. 8. Универсальный раствор ReNu® MPS имеет сниженную концентрацию дезинфектанта (полиаминопропил бигуанида - 0,00005 %) по сравнению с другими растворами на основе полиаминопропил бигуанида по данным «Средства ухода за контактными линзами. Каталог 2022». Специальное приложение к журналу «Вестник оптометрии». 9. Материалы внутренних исследований компании Bausch + Lomb, 2020. Оценка биосовместимости универсального раствора ReNu® Advanced путем осмотра пациентов с помощью щелевой лампы после трёх месяцев использования.

Раствор универсальный ReNu® MultiPlus 60, 120, 240, 360 мл, принадлежности: контейнер для контактных линз. Медицинское изделие. Рег. Уд. № ФСЗ 2007/00771 от 10.10.2022 г.; Раствор универсальный ReNu® MPS 120, 240, 360 мл, принадлежности: контейнер для контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2007/00771 от 10.10.2022 г.; Раствор универсальный ReNu® Advanced по уходу за мягкими контактными линзами. Медицинское изделие. Рег. уд. № РЗН 2022/19132 от 15.12.2022 г.; Раствор многофункциональный дезинфицирующий ACUVUE® Revitalens. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2011/10818 от 28.07.2020 г.; Раствор многофункциональный Опти-Фри Реплениш с контейнером для хранения контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2009/05850 от 28.11.2019 г.; Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри PureMoist (ПьюрМоист) с контейнером для хранения контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2011/10610 от 31.12.2020 г.; Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри Экспресс с контейнером для хранения контактных линз. Медицинское изделие. Рег. уд. № ФСЗ 2009/03920 от 31.12.2020 г.

**ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ**